


## Armoires de sécurité pour bouteilles de gaz, certifiées EN14470-2

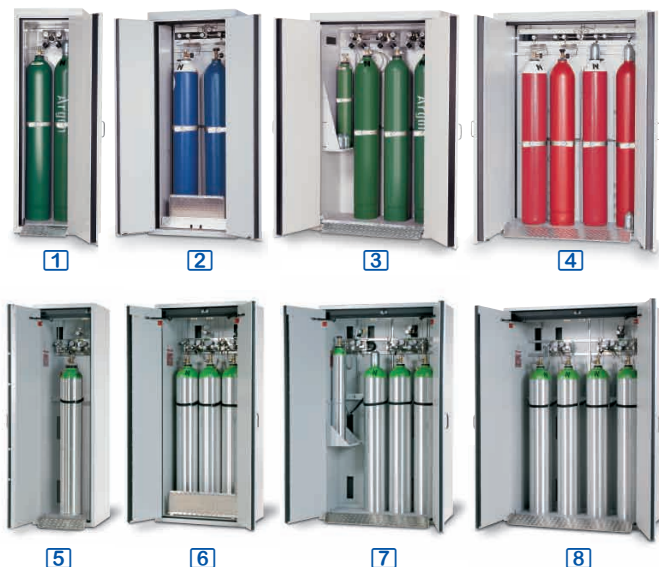

- pour installation directe à l'intérieur d'un bâtiment en toute sécurité
- **construction à double parois en acier verni** recouvert d'une protection plastique antidérapante et anticorrosion
- portes battantes, ouvertures à 180°, accès facile à l'intérieur de l'armoire, blocages intermédiaires à 90° et 160°
- serrure de porte à canon interchangeable, personnalisation possible
- fermeture automatique des portes au-dessus de 70°C
- **ventilation horizontale et verticale à l'intérieur de l'armoire**
- 6 ou 12 ouvertures placées sur le toit de l'armoire pour les conduites de gaz et les capteurs
- **raccord de ventilation** sur le toit pour ventilateur externe (NW Ø75 mm)
- borne de mise à la terre
- chargement facile par rampe d'accès rabattable en aluminium
- maintien des bouteilles par sangles de sécurité, entretoise sur la paroi arrière pour le maintien des bouteilles à distance fixe, montage facile des serpentins et manomètres
- armoire 1 porte, largeur 600 mm : porte ouverture à gauche ou à droite au choix à préciser à la commande
- ventilation : voir page 328
- armoires livrées complètes avec rampe de montage et sangles de sécurité pour maintien des bouteilles

### armoires EN14470-2 - 30 minutes

	2 x 50 litres / larg. 600 mm	3 x 50 litres / larg. 900 mm	4 x 50 litres / larg. 1200 mm	4 x 50 litres / larg. 1400 mm
capacité	2 x bouteilles 50 litres	3 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres
dim. internes (lxpxh mm)	490 x p450 x h1900 mm	790 x p450 x h1900 mm	1090 x p450 x h2050 mm	1290 x p450 x h1900 mm
nb. de passages sur le toit	12 passages	24 passages	48 passages	60 passages
dim. externes (lxpxh mm)	600 x p615 x h2050 mm	900 x p615 x h2050 mm	1200 x p615 x h2050 mm	1400 x p615 x h2050 mm
poids	290 kg	340 kg	470 kg	510 kg
Armoires pour bouteilles de gaz 30 min	EX7660 [1] 2 530,00 €	EX7690 [2] 2 930,00 €	EX7620 [3] 3 060,00 €	EX7640 [4] 3 840,00 €
étagère latérale (pour bouteilles 10 l)	EX7650 130,00 €	EX7650 130,00 €	EX7650 130,00 €	EX7650 130,00 €

### armoires EN14470-2 - 90 minutes

	1 x 50 litres / larg. 600 mm	3 x 50 litres / larg. 900 mm	4 x 50 litres / larg. 1200 mm	4 x 50 litres / larg. 1400 mm
capacité	1 x bouteille 50 litres	3 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres	4 x bouteilles 50 litres
dim. internes (lxpxh mm)	440 x p400 x h1875 mm	740 x p400 x h1875 mm	1040 x p400 x h1875 mm	1240 x p400 x h1875 mm
nb. de passages sur le toit	12 passages	24 passages	48 passages	60 passages
dim. externes (lxpxh mm)	600 x p615 x h2050 mm	900 x p615 x h2050 mm	1200 x p615 x h2050 mm	1400 x p615 x h2050 mm
poids	305 kg	355 kg	485 kg	525 kg
Armoires pour bouteilles de gaz 90 min	EX9360 [5] 3 380,00 €	EX9300 [6] 3 930,00 €	EX9400 [7] 4 530,00 €	EX9500 [8] 4 950,00 €
étagère latérale (pour bouteilles 10 l)	EX9150 88,00 €	EX9150 88,00 €	EX9150 88,00 €	-