

Emballages secondaires UN3373 - P650 - catégorie B


emballages secondaires UN3373 - catégorie B - P650 et IATA650
(ne peuvent être utilisés seuls)

utilisation des emballages secondaires :

- ces kits ne constituent qu'un emballage secondaire, ils ne permettent le transport de matières infectieuses que sous réserve de l'utilisation des services d'un transporteur homologué en mesure de fournir l'emballage tertiaire (mallette ou carton) complétant le kit selon l'instruction d'emballage P650
- si les échantillons de diagnostic (matières infectieuses type B) sont expédiés directement **sans** les services d'un transporteur homologué, l'utilisation des kits d'emballage complets P650 est indispensable (voir page ci-contre)
- ces kits peuvent être utilisés seuls de manière interne, c'est à dire au sein d'un même site

BK1100 sachet d'emballage secondaire UN3373

- ▶ pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides de catégorie B, livré sans boîte de transport

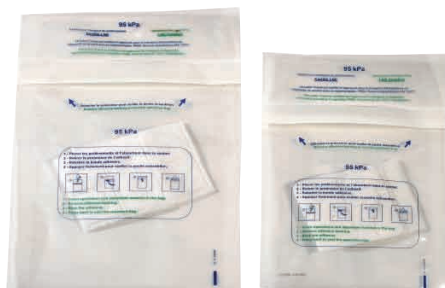

1

2



absorbant 10 x 20 cm



cartoucière 10 poches

- **emballage secondaire** : sachet polyéthylène, rabat auto-collant, marquage UN3373, (résistance 95 kPa)
- **absorbant** : cartoucière absorbante à 10 places pour y insérer 10 tubes de prélèvement ou un absorbant 10x20 cm permettant d'absorber le contenu des échantillons transportés en cas de fuite accidentelle
- **BK1110 sachet petit modèle** : pour tubes de prélèvement avec cartoucière absorbante à 10 poches permettant de recevoir 10 tubes de prélèvement
dim. utiles (l x h) : 150 x h180 mm - ext. (l x h) : 180 x h275 mm
- **BK1210 sachet grand modèle** : pour tubes de prélèvement avec cartoucière absorbante à 10 poches permettant de recevoir 10 tubes de prélèvement
dim. utiles : 285 x h250 mm - ext. : 310 x h385 mm
- **BK1220 sachet grand modèle** : pour écouvillons avec carton absorbant 10x20 cm
dim. utiles : 285 x h250 mm - ext. : 310 x h385 mm

référence	Prix HT
BK1110 2 Sachet UN3373 petit modèle avec cartoucière	4,90 €
BK1210 1 Sachet UN3373 grand modèle avec cartoucière	6,90 €
BK1220 Sachet UN3373 grand modèle avec absorbant	4,90 €

BK1700 tube rigide d'emballage secondaire UN3373 avec pochette de transport

- ▶ pour le transport de matières infectieuses liquides ou solides de catégorie B, capacité 1 à 4 tubes primaires, livré sans boîte de transport



kit : tube rigide UN3373, absorbant et pochette de transport

les tubes de prélèvement (emballages primaires) sont placés dans le tube rigide avec l'absorbant, le tout est inséré dans la pochette de transport

- **emballage secondaire** : tube plastique rigide UN3373, Ø 40 x h155 mm, capacité 4 tubes de prélèvement
- **absorbant 10 x 10 cm** : permettant d'absorber le contenu des échantillons transportés en cas de fuite accidentelle
- **pochette de transport** : double poche avec rabat auto-collant, instructions d'utilisation imprimées, une poche destinée à recevoir les documents, l'autre poche reçoit le tube plastique rigide, permet d'éviter tout contact échantillons et documents
- **les tubes de prélèvement sont placés avec l'absorbant dans le tube plastique rigide (emballage secondaire), l'ensemble est inséré dans la pochette double poche**

référence	Prix HT
BK1700 Tube rigide UN3373 avec absorbant et sachet de transport double poche	4,90 €