

Microtubes cryogéniques stériles Simport®

stériles, exempts de DNase, RNase et apyrogènes

- tubes et bouchons en polypropylène autoclavable, bouchon avec joint intérieur en silicone assurant une parfaite étanchéité
- **filetage interne** : pour stockage en phase liquide et vapeur
- **filetage externe** : pour stockage en phase vapeur
- les tubes et les bouchons ont les mêmes coefficients de dilatation, garantissant ainsi l'herméticité lors des changements de température
- tubes avec graduations indélébiles
- surface blanche pour inscription et identification des échantillons
- centrifugation : jusqu'à 17000 g
- température : jusqu'à -190°C
- exempts DNase, RNase et apyrogènes
- livrés vissés et stériles par rayons gamma
- pastilles d'identification placées sur les capuchons
- **remarque** : la centrifugation des tubes avec jupe (autostable) n'est pas recommandée



microtubes cryogéniques à filetage interne avec joint silicone

	dimensions	réf.	Prix HT, les 100
1,2 ml avec jupe	Ø 12,5 x h43 mm	AB9001	
2,0 ml sans jupe	Ø 12,5 x h48 mm	AB9003	
2,0 ml avec jupe	Ø 12,5 x h49 mm	AB9004	
4,0 ml avec jupe	Ø 12,5 x h72 mm	AB9007	
4,0 ml sans jupe	Ø 12,5 x h72 mm	AB9008	
5,0 ml sans jupe	Ø 12,5 x h92 mm	AB9009	

microtubes cryogéniques à filetage externe avec joint silicone

	dimensions	réf.	Prix HT, les 100
1,2 ml avec jupe	Ø 12,5 x h43 mm	AB9111	
2,0 ml sans jupe	Ø 12,5 x h48 mm	AB9113	
2,0 ml avec jupe	Ø 12,5 x h49 mm	AB9114	
3,0 ml avec jupe	Ø 12,5 x h72 mm	AB9117	
4,0 ml avec jupe	Ø 12,5 x h78 mm	AB9118	
5,0 ml avec jupe	Ø 12,5 x h92 mm	AB9119	

pastilles d'identification pour les bouchons de tubes cryogéniques à pas de vis interne ou externe


- insertion et retrait facile grâce à une petite encoche latérale
- idéal pour faciliter l'identification des échantillons dans les congélateurs, les postes de travail, etc.
- 5 coloris



référence	type	Prix HT les 500
AB9151	bleu	
AB9152	jaune	
AB9153	rouge	
AB9154	vert	

Boîtes cryogéniques en polycarbonate

- tubes : 1,2 - 2 - 3 - 4 et 5 ml
- résistance à la température : -190°C à +121°C

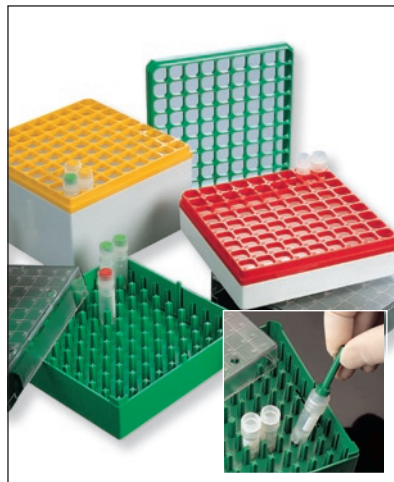

- boîtes en polycarbonate, autoclavables
- température : -190°C à +121°C
- pour tubes cryogéniques 1,2 - 2 - 3 - 4 ou 5 ml
- couvercle transparent avec grille numérotée pour l'identification des tubes
- empilables, séparateurs en couleur au choix (jaune, rouge ou vert)
- livrées avec l'adaptateur spécial pour prendre les tubes cryogéniques

Boîtes cryogéniques pour 81 tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml

dim. (lpxh) : 133 x 133 x 52 mm

référence	couleur	Prix HT
AX1801	jaune	
AX1802	rouge	
AX1803	vert	

Boîtes cryogéniques pour 100 tubes cryogéniques 1,2 et 2 ml

dim. (lpxh) : 133 x 133 x 52 mm

référence	couleur	Prix HT
AX1811	jaune	
AX1812	rouge	
AX1813	vert	

Boîtes cryogéniques pour 81 tubes cryogéniques 3, 4 ou 5 ml

dim. (lpxh) : 133 x 133 x 95 mm

référence	couleur	Prix HT
AX1821	jaune	
AX1822	rouge	
AX1823	vert	