

Tables anti-vibratoires pneumatiques

système à isolation active pneumatique

- ▶ absorbe 98 % des vibrations inférieures à 10 Hz
- ▶ efficacité multidirectionnelle
- ▶ charge admissible : 350 kg
- ▶ extrêmement robustes
- ▶ pour balances, microscopes, lasers, optiques, appareils de micro-soudure, systèmes de micro-usinage, micro-électronique, etc.



- vibrations absorbées jusqu'à des fréquences verticale ou horizontale de 3 à 5 Hz
- efficacité multidirectionnelle : compensation totale et stabilité parfaite
- charge max. admissible : jusqu'à 400 kg
- construction extrêmement robuste en tube d'acier 80 x 80 mm
- plateau en granit, épaisseur 70 mm
- 4 supports isolateurs pneumatiques
- coffret de raccordement pneumatique avec 3 régulateurs de pression intégrés
- 4 roulettes équipées chacune d'un vérin de mise à niveau
- sans entretien
- faible encombrement
- isolation active et passive
- niveau et pression réglable par régulateurs pneumatiques


- **CE800** :
dim (l x p x h) : 800 x 800 x 770 mm
poids : 182 kg
- **CE1000** :
dim (l x p x h) : 1000 x 800 x 770 mm
poids : 230 kg

référence	Prix HT
CE800 Table anti-vibratoire larg. 800 mm	
CE1000 Table anti-vibratoire larg. 1000 mm	

Tablette anti-vibration

- à poser sur une pailleuse afin d'isoler les balances des vibrations
- vibrations absorbées jusqu'à une fréquence de 9 Hz
- surface polie, résistante aux produits chimiques et aux éraflures
- 4 supports vibro-absorbeurs passifs, avec pieds en Néoprène
- pour balances jusqu'à 16 kg
- dim. (l x p x h) : 450 x 560 x 76 mm
- poids : 39 kg

référence	Prix HT
TB1020 Tablette anti-vibration	

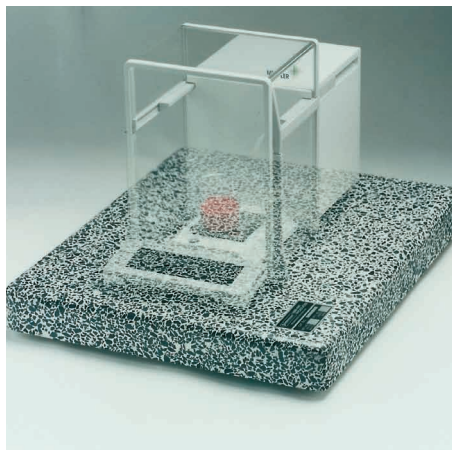

Tables anti-vibratoires



- la balance de précision ou le microscope est placé sur une masse anti-vibratoire isolée de la table principale, les vibrations de la table ne sont ainsi jamais transmises
- masse anti-vibratoire passive
- plan de travail stratifié, évidé (découpe 298 x 398 mm) protecteur
- table complète livrée en 2 parties

référence	dimensions	Prix HT
tables anti-vibratoires		
KL8600	600 x p600 x h900 mm	
KL8610	600 x p750 x h900 mm	
tables anti-vibratoires, avec dossier et tablette		
KL8601	600 x p750 x h900 mm	
KL8611	600 x p900 x h900 mm	
prises électriques montées sur table		
KL4668	Bloc 3 prises non protégées	
KL4669	Bloc 4 prises protégées avec inter.	
KL4631	Potence 2 prises avec terre	

Table pour pesées sous la balance

- table en aluminium
- fond intermédiaire réglable en hauteur
- 4 vis de mise à niveau
- dim. (l x p x h) :
350 x 290 x h370 mm



référence	Prix HT
BM5210 Table pour pesées sous la balance	