

Appareils à filtration sous vide en verre

- Ø 25, Ø 50 ou Ø 100 mm
- support de la membrane en verre fritté ou en acier inoxydable recouvert de PTFE
- montage sur la fiole à vide grâce à un bouchon caoutchouc, ou un raccord rodé
- modèles à raccord rodé : fiole à vide livrée avec l'appareil et équipée d'un raccord olive pour montage du tuyau à vide
- **appareils avec support en verre fritté** : utilisés de préférence en raison de la répartition particulièrement homogène des résidus sur la surface de la membrane filtrante, conviennent pour les analyses microscopiques de résidus, les contrôles de particules, etc.
- **appareils avec support en acier recouvert de PTFE** : souvent utilisés dans les analyses biochimiques, pour des examens radio-chimiques, pour la fabrication de liquides ultrapurs, etc.

Applications

- clarification des liquides
- analyses gravimétriques
- contrôles microbiologiques
- stérilisation
- préparation de solvants de liquides ultrapurs
- filtrations de solutions alcalines et agressives
- filtrations de solutions tampon pour HPLC


Stérilisation

Par autoclave à 121°C / 20 minutes ou 134°C / 10 minutes ou 180°C / étuve à sec.

Fiole à vide



montage sur fiole à vide par raccord rodé

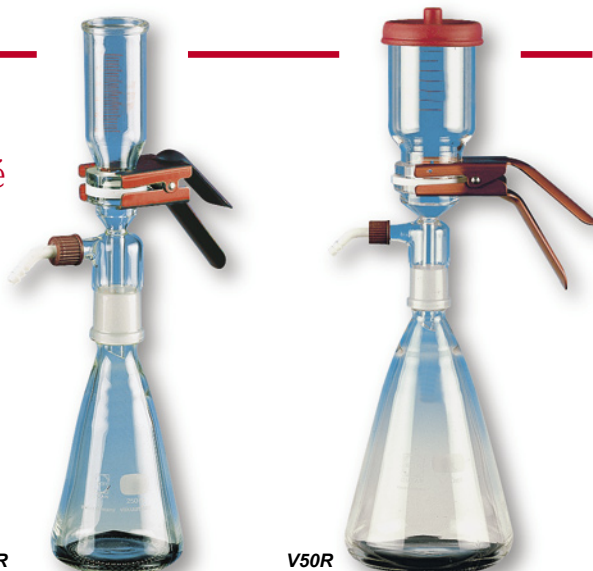


V25R

V50R

appareils complets avec raccords rodés et fiole à vide

référence	volum		support membrane	fiole à vide	Prix HT
	entonnoir	Ø membrane			
V25R	60 ml	24/25 mm	verre fritté	250 ml	
V25TR	60 ml	24/25 mm	acier/PTFE	250 ml	
V50R	250 ml	47/50 mm	verre fritté	1 000 ml	
V50TR	250 ml	47/50 mm	acier/PTFE	1 000 ml	

montage sur fiole à vide par bouchon percé

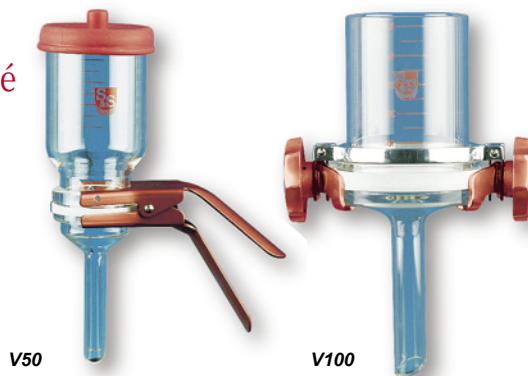

V50

V100

appareils avec raccord par bouchon percé, sur fiole à vide ou pot de Witt

référence	volum		support membrane	Prix HT sans fiole, sans bouchon
	entonnoir	Ø membrane		
V25	60 ml	24 / 25 mm	verre fritté	
V25T	60 ml	24 / 25 mm	acier/PTFE	
V50	250 ml	47 / 50 mm	verre fritté	
V50T	250 ml	47 / 50 mm	acier/PTFE	
V100	500 ml	100 mm	verre fritté	
V100T	500 ml	100 mm	acier/PTFE	

bouchons percés et fioles à vide

	Prix HT
V25BCST	Bouchon pour V25 et V25T et fiole à vide de 1000 ml
V50BCST	Bouchon pour V50 et V50T et fiole à vide de 1000 ml
V100BCST	Bouchon pour V100 et V100T et fiole à vide de 1000 ml
GW1334	Fiole à vide 1000 ml