


CONGÉLATEURS

Congélateurs ATEX BIOCOMPACT® -25°C à -5°C certifiables COFRAC

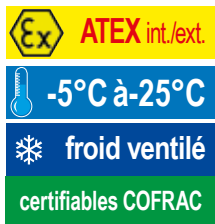

Caractéristiques générales

- régulateur électronique avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- report des alarmes sur un contact sec
- historique alarme température
- température constante et homogène
- 2 passages de cuve diamètre 25 mm pour mise en place d'1 ou plusieurs sondes externes GTC pour qualification sur site
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- évaporation automatique des condensats

Construction

- extérieur acier laqué blanc
- isolation 50 mm de polyuréthane expansé
- sens d'ouverture réversible
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- fluide réfrigérant écologique R600a
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs sur demande

capacité brute	125 litres	218 litres	346 litres	583 litres
capacité utile	104 litres	189 litres	312 litres	419 litres
nombre de grilles livrés / max.	3/4 grilles	4/11 grilles	5 / 22 grilles	4/24 grilles
nombre de tiroirs livrés / max.	0/4 tiroirs	0/7 tiroirs	0 / 13 tiroirs	0/12 tiroirs
dim. ext.(lxpxh)	595 x 640 x h830 mm	595 x 640 x h1220 mm	595 x 640 x h1901 mm	695 x 875 x h2000 mm
poids	43,2 kg	57,5 kg	74,7 kg	106 kg
consommation	1,47 kWh/24h	1,57 kWh/24 h	2,06 kWh/24 h	4,05 kWh/24 h
pieds / roues	2 roues/2 pieds	2 roues/2 pieds	2 roues fixes et 2 roues 360° avec freins	2 roues fixes et 2 roues 360° avec freins
Réfrigérateurs porte pleine	GM1925 1	GM1935 2	GM1945 3	GM1955 4
accessoires				
grilles acier plastifié	GM1801	GM1801	GM1801	GM1801
grilles inox	GM1805	GM1805	GM1805	GM1805
plateaux perforés inox	GM1809	GM1809	GM1809	GM1809