


Autoclaves automatiques

capacité

60 à 110 litres

- ▶ fonctionnement automatique
- ▶ système de verrouillage du couvercle sur la façade avant
- ▶ multiples modes de stérilisation

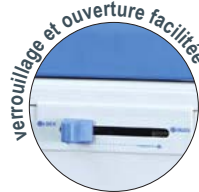

- système de contrôle du processus de stérilisation, de la maintenance, de la calibration, de la traçabilité et de l'enregistrement des données
- alarme de niveau d'eau et verrouillage de l'autoclave en cas de faible niveau d'eau
- panneau de contrôle pour le réglage de la température et de la pression, affichage de la température et du minuteur
- démarrage différé programmable (jusqu'à 6 jours)
- jauge de pression
- évacuation automatique de la vapeur à la fin du cycle via une valve
- système de sécurité en cas de surchauffe ou de surpression
- cuve en acier inox SUS304
- autoclaves sur roulettes avec freins
- temps de stérilisation de 1 à 300 minutes
- temps de liquéfaction de 1 à 300 minutes
- protection thermique des poignées et de l'appareil
- alimentation automatique en eau (réservoir)
- livrés avec 2 ou 3 paniers fil d'acier fond grillagé Ø370 mm (quantité selon modèle, voir tableau)

Modes de verrouillage du couvercle

- réglable selon différentes températures : bloquer l'ouverture du couvercle tant que la température souhaitée n'est pas atteinte,
- verrouillage mécanique du couvercle : huit points de verrouillage uniformes,
- double verrouillage interne : permet de gérer la température et la pression en temps réel dans la chambre et d'empêcher l'ouverture du couvercle

Modes de stérilisation

- mode solide : chauffage / stérilisation / échappement et refroidissement de l'air
- mode solide avec séchage : chauffage / stérilisation / échappement, refroidissement de l'air, évacuation de l'eau et séchage
- mode liquide : chauffage / stérilisation / pré-refroidissement / évacuation de la vapeur
- mode eaux usées : chauffage / stérilisation / évacuation de la vapeur et refroidissement de l'air
- mode AGAR : chauffage / fonte / maintien chauffage

	60 litres	85 litres	110 litres
dimensions cuve	Ø 400 x 505 mm	Ø 400 x 700 mm	Ø 400 x 895 mm
température	105 à 138°C	105 à 138°C	105 à 138°C
nombre de programmes	jusqu'à 60 programmes	jusqu'à 60 programmes	jusqu'à 60 programmes
pression	2,7 bar	2,7 bar	2,7 bar
puissance	2,9 kW	4,6 kW	4,6 kW
dimensions extérieures	660 x 644 x 980 mm	660 x 644 x 980 mm	660 x 644 x 1180 mm
poids	101 kg	113 kg	125 kg
Autoclaves automatiques	LC1610	LC1620	LC1630
accessoires			
panier fil d'acier - fond grillagé Ø370 mm (inclus)	LC1611 les 2	LC1621 les 2	LC1631 les 3
panier plein en acier inox Ø240 mm	LC1601	LC1601	LC1601
panier plein en acier inox Ø315 mm	LC1602	LC1602	LC1602
thermosonde avec câble flexible	LC1603	LC1603	LC1603
imprimante	LC1604	LC1604	LC1604