



Ces appareils ne sont pas destinés à stériliser des dispositifs médicaux, ils ne sont pas des dispositifs médicaux CE 93/42.

Autoclave en acier inox contrôle par tablette tactile

capacité

18 litres




Sterilisation des
instruments, appareils,
flacons et déchets.

- cuve inox 304L
- utilisation très simple
- système de fermeture :
verrouillage en toute sécurité
d'un seul geste à l'aide d'une
poignée (sans pas de vis)
- sécurités : blocage du couvercle
contre l'ouverture sous pression,
soupape de commande anti-blo-
cage, soupape de surpression,
soupape de sécurité de surpres-
sion
- chauffage intégré dans le fond du
boîtier, les éléments chauffants ne
sont pas dans l'eau (durée de vie
étendue)
- vidéo explicative des tâches
- panier métallique en option



1

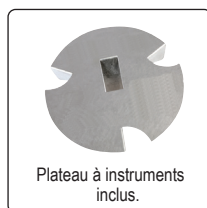

Plateau à instruments
inclus.

	automatique jusqu'à +140°C
contrôle	Entièrement automatique Programmable par l'utilisateur max. 8 données temps/T°C par programme
pression max.	2,7 Bar
dimensions intérieures	Ø 260 x h350 mm
écran	tablette avec écran tactile intuitif 7"
évacuation de la vapeur	réservoir intégré de récupération du condensat
manomètre	manomètre électronique
interfaces / connexions	USB / Wifi / Bluetooth
conformes BPL	conforme BPL
logiciel analyse données	logiciel basic inclus
stockage des données	6 mois de connexion gratuite à CertoCloud
dimensions extérieures / poids	440 x 400 x h600 mm / 15 kg
alimentation / puissance	230 V / 50 Hz / 1900 W
Autoclave 18 litres	PB1655 1
accessoires	
panier métallique Ø 250 mm	PB1616

Autoclave 8 litres

capacité

8 litres

- démarrage différé programmable 0 à 99 h



- fonctionnement automatique
- régulateur électronique de température
avec sonde de température Pt100
- affichage digital de la température réelle
- interface RS232
- fermeture rapide du couvercle en toute
sécurité avec dispositif à baïonnette
- soupape et thermostat de sécurité
- purge automatique de l'air
- valve manuelle pour le drainage et l'éva-

- poration de la vapeur
- manomètre de contrôle de la pression
- voyant lumineux indicateur de chauffe
- cuve en acier inox 18/10
- boîtier et couvercle en acier inoxydable
AISI 304 avec peinture époxy
- livré complet avec panier en acier inoxy-
dable et grille de protection

température	réglable de 100 à 127°C
capacité	8 litres
pression max.	1,5 bar
minuterie	réglable de 3 à 180 min
dimensions cuve	Ø 220 x 180 mm
dimensions externes	340 x 340 x h430 mm
alimentation	230 V / 50 Hz / 1000 W
poids	11 kg
Autoclave	AR1210
accessoires	
panier supplémentaire 200 x h150 mm	AR1269
kit logiciel	AR1260