


Becs Bunsen de sécurité


Vanne de sécurité automatique
en cas d'extinction de la flamme

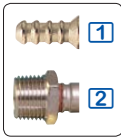

- capteur de température et de contrôle de la flamme placé directement dans la flamme et relié à une vanne de sécurité placée dans le circuit d'arrivée de gaz
- interruption de l'arrivée de gaz en cas d'extinction de la flamme
- temps de réponse du capteur : < 60 s.
- pression d'alimentation en gaz : 200 à 300 mm

dim.	gaz	référence	Prix HT
becs de sécurité avec raccord cannelé 1			
Ø 11 x 140 mm	gaz de ville	SML020	
Ø 11 x 140 mm	gaz butane / propane	SML030	
Ø 11 x 150 mm	multigaz	SML010	
becs de sécurité avec raccord à vis 1/2" 2			
Ø 11 x 140 mm	gaz de ville	SML020V	
Ø 11 x 140 mm	gaz butane / propane	SML030V	
Ø 11 x 150 mm	multigaz	SML010V	


Becs Bunsen avec veilleuse

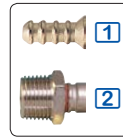

- en laiton nickelé, base en acier chromé
- régulateur d'air et stabilisateur de flamme
- la veilleuse assure un débit de gaz minimum, même robinet fermé

dim.	gaz	référence	Prix HT
becs Bunsen avec raccord cannelé 1			
Ø 11 x 130 mm	gaz propane	SML247	
Ø 11 x 130 mm	gaz naturel	SML248	
becs Bunsen avec raccord à vis 1/2" 2			
Ø 11 x 130 mm	gaz propane	SML247V	
Ø 11 x 130 mm	gaz naturel	SML248V	

Plaques-support de sécurité en vitrocéramique

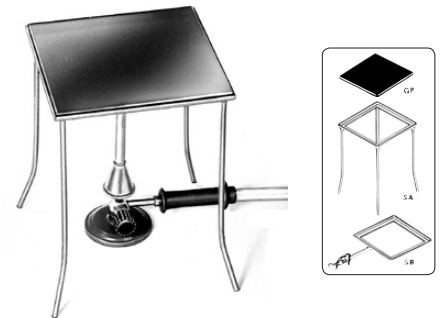


- aucun dégagement d'élément nocif pour la santé de l'utilisateur (**sans amiante**)
- résistance chimique aux liquides corrosifs utilisés dans les laboratoires
- économie d'énergie : l'excellente transmission du spectre infrarouge permet un gain énergétique d'environ 20 %
- échauffement très rapide
- nettoyage simple, matériau non poreux
- résistance aux chocs thermiques : -200°C à +700°C, les surfaces chaudes peuvent être aspergées d'eau froide
- pas de déformation, ne vieillissent pas

	référence	Prix HT
plaques		
Plaque 135 x 135 mm	GP1	
Plaque 155 x 155 mm	GP2	
Plaque 175 x 175 mm	GP3	
supports 4 pieds en acier inox		
Support pour GP1, h 180 mm	SA1	
Support pour GP2, h 210 mm	SA2	
Support pour GP3, h 220 mm	SA3	
supports pour montage avec noix		
Support pour GP1	SB1	
Support pour GP2	SB2	
Support pour GP3	SB3	

Becs Bunsen à raccord à vis 1/2"

- bec en laiton nickelé, base en acier chromé
- robinet à vis
- régulateur d'air et stabilisateur

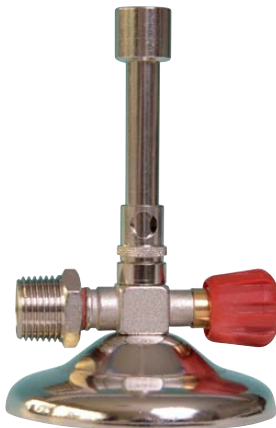

dimensions	gaz	référence	Prix HT
Ø 18 x 125 mm	butane / propane	SML234V	