

Cuve en verre panier en verre



- dim. cuve : 105 x 85 x h74 mm
- panier en verre capacité 10 lames ou 20 lames dos à dos, dim. 92 x 45 x h70 mm

référence	Prix HT
C11 [1] Cuve avec couvercle	
C10 [2] Panier pour 10 lames	
C9 [3] Crochet pour panier	
C5 Kit cuve + panier + crochet	

Cuve en verre panier en inox



- cuve et couvercle en verre sodocalcique à paroi épaisse, dim. 105 x 85 x h70 mm
- panier à coloration en acier inox
- capacité 10 lames ou 20 dos à dos

référence	Prix HT
C1 Cuve en verre avec couvercle	
C2 Panier en inox 10 lames	

Cuve en verre panier en inox



- cuve et couvercle en verre
- portoir en acier inox, capacité 10 lames

référence	Prix HT
CU1010 Cuve sans couvercle	
CU1012 Couvercle en verre	
CU1014 Panier en inox 10 lames	
CU1018 Kit Cuve couvercle panier	

Sur-cuve




- capacité 3 cuves C1, C11 ou CU1010
- pour la coloration successive avec le même support et pour éviter les taches de colorant lors du passage d'une cuve à l'autre
- dim. 273 x 145 x h55 mm

référence	Prix HT
TH1014 Grande cuve en verre	

Automate de coloration des lames

- un bras robotisé trempe, agite, rince et sèche les lames
- réduction de la manipulation
- mémoire 10 programmes

- automate constitué d'une plate-forme de coloration avec des bacs et d'une glissière avec un bras robotisé muni d'un panier support de lames
- panneau de commande séparé pour une meilleure protection
- la plate-forme de coloration présente 4 bacs à coloration en plastique, un puits de rinçage et un puits de séchage
- les lames sont chargées dans le panier, capacité jusqu'à 20 lames
- le bras robotisé se déplace sur la glissière, il plonge et agite le panier de coloration dans les bacs successifs
- l'eau de rinçage peut être élevée jusqu'à +15°C au-dessus de la température de la pièce
- système de drainage en option pour renouveler l'eau entre chaque rinçage, évitant toute contamination croisée
- les lames peuvent être séchées au ventilateur, avec ou sans chaleur
- programmation : position du panier, temps de trempage, de repos et d'agitation et de séchage
- mémoire 10 programmes
- dim. / poids : 700 x 440 x h400 mm / 23 kg
- alim. : 100-240 V - 50 / 60 Hz - 250 W
- livré avec 1 panier et 4 bacs en plastique interchangeables, avec couvercles

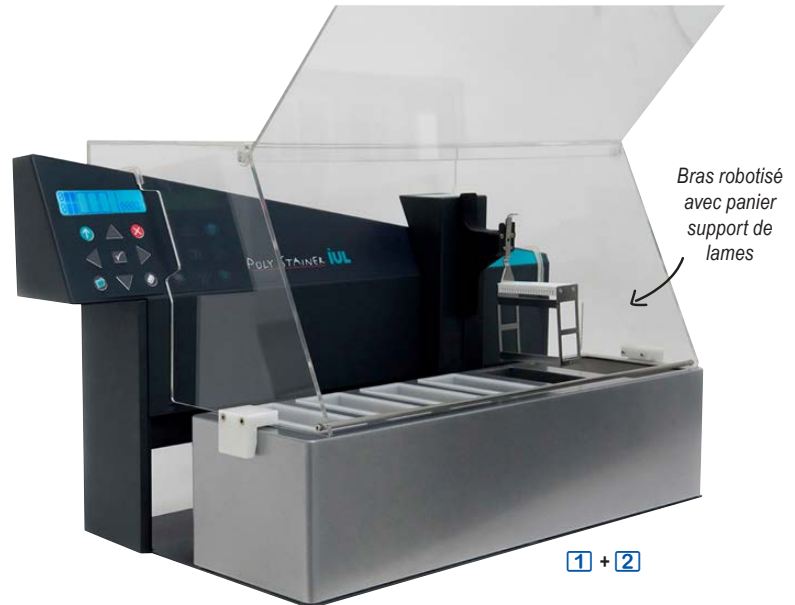

[1] + [2]

capacité portoir	référence	Prix HT
Automate de coloration	UL2800 [1]	
Accessoires		
Système de drainage du bac de rinçage	UL2801	
Couvercle en méthacrylate	UL2802 [2]	
Panier support de lames de rechange	UL2803	
Bac en plastique de rechange, avec couvercle	UL2804	