

## Compteurs différentiels hématologiques

- ▶ 15 touches de comptage, 6 touches de fonction, 4 touches de programme
- ▶ système de lecture des résultats sans risque d'erreur
- ▶ touche correction
- ▶ interface pour PC



### Compteur différentiel multifonctions

- 15 touches de comptage avec indicateur lumineux
- résultats en valeur absolue ou en pourcentage du total
- le nombre total à compter est fixé à l'avance (programmable de 100 et 1000 par pas de 100), verrouillage automatique quand le total est atteint, (le comptage peut malgré tout continuer, mais après une pression sur la touche de fonction "Go on + count")

### Pas de risques d'erreur

- affichage des compteurs à tout instant (en valeur absolue ou en %), même pendant la phase de comptage

- à la lecture des résultats, tous les indicateurs de touche clignotent, ils s'éteignent au fur et à mesure que le résultat est affiché, l'opérateur visualise facilement les touches déjà lues et celles qui restent à lire

### Connexion PC, logiciel PC inclus

- interface pour branchement sur PC et logiciel spécialement adapté
- transfert des données vers le PC
- affichage simultané du programme sélectionné, du total courant, du total pré-programmé et des 15 compteurs individuels en valeur absolue et en pourcentage
- permet d'attribuer un autre nom à chaque touche de comptage, ainsi qu'un ensemble

- d'informations liées à la formule sanguine : patient (nom et numéro), date, heure, nom de l'opérateur, remarques
- contrôle des erreurs

### Caractéristiques techniques

- dim. : 210 x 190 x h35 mm / 0,9 kg
- alimentation : 230 V / 6 W

référence **Prix HT**

CDH15 Compteur hématologique 15 touches

CDH15PC Compteur hématologique 15 touches, avec interface PC et logiciel


## Compteurs hématologiques à touches



- boîtier robuste en acier
- touches alternées rouges et blanches
- chaque groupe de cellules est rappelé par son nom au dessus de chaque compteur
- 2 manettes de remise à zéro pour les compteurs et pour le totalisateur de part et d'autre du compteur
- alarme sonore indiquant le passage à 100 d'un des compteurs

	compteur 5 + 1 touches	compteur 8 + 1 touches
<b>1 compteur par groupe de cellules</b>	baso - éosin - seg lymph - mono	baso - éosin - seg lymph - mono - myélo juven - stab
<b>1 compteur totalisateur</b>	1 compteur totalisateur	1 compteur totalisateur
<b>dimensions (LxIxh)</b>	250 x 76 x h56 mm	320 x 76 x h56 mm
<b>Compteurs hématologiques</b>	<b>MC1605</b>	<b>MC1608</b>

## Compteurs différentiels hématologiques digitaux

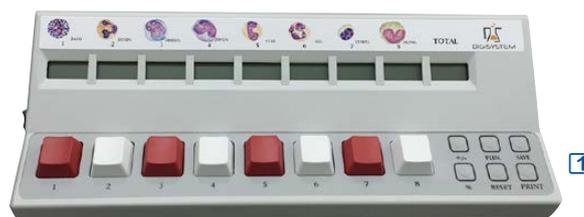

- clavier 8 touches blanches et rouges
- écran LCD à 3 chiffres devant chaque touche
- comptage simple et précis
- étiquettes avec illustration des cultures cellulaires en face de chaque touche
- la touche émet une validation sonore à chaque pression
- alarme déclenchée à partir d'un incrément de 100 au-delà du compte total
- calcul de pourcentages
- alimentation : 240 V
- certifiés ISO 9001 et ISO 13485

### Modèle standard

- touches +/- pour augmenter ou diminuer le compte
- fonctions d'ajustement du contraste et affichage du niveau de la batterie

### Modèle pro

- mêmes fonctions que le modèle standard avec en plus :  
une interface RS232 (possibilité de connecter une imprimante) et un lecteur de carte SD  
fonctions d'impression et de sauvegarde des données

référence **Prix HT**

MC1700 Compteur différentiel standard

MC1705 Compteur différentiel pro **1**