

Compteur hématologique 15 touches

- ▶ 15 touches de comptage, 5 touches fonction, 4 touches programme
- ▶ système de lecture des résultats sans risque d'erreur
- ▶ touche correction
- ▶ interface pour PC

Compteur différentiel multifonctions

- 15 touches tactiles de comptage avec indicateur lumineux
- large écran couleur, 3,5", affichage des résultats en valeur absolue ou en pourcentage du total
- pré-programmation du nombre total à compter (50, ou 1000 par pas de 50), verrouillage automatique lorsque le total est atteint (le comptage peut continuer, après une pression sur la touche "Go on + count")

Pas de risques d'erreur

- affichage des compteurs à tout instant, même pendant la phase de comptage
- à la lecture des résultats, tous les indicateurs de touche clignotent et s'éteignent au fur et à mesure que le résultat est affiché, l'opérateur visualise facilement les touches déjà lues et celles restant à lire

Transfert des données vers PC

- interface USB pour connexion sur PC, logiciel inclus
- affichage simultané du programme sélectionné, du total courant, du total pré-programmé et des 15 compteurs individuels en valeur absolue et en pourcentage
- possibilité d'attribuer un autre nom à chaque touche de comptage, ainsi qu'un ensemble d'informations liées à la formule sanguine : patient (nom et numéro), date, heure, nom de l'opérateur, remarques
- contrôle des erreurs


Caractéristiques techniques

- dim. : 234 x 130 x h35 mm / 0,9 kg
- alim. : 230 V / 6 W



référence **Prix HT**
CDH16 Compteur
 hématologique 15 touches


Compteurs hématologiques à touches

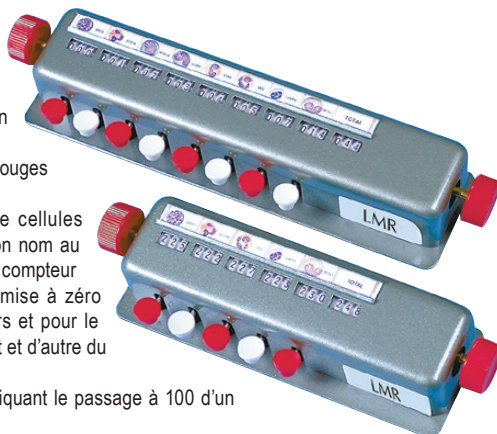

- boîtier robuste en acier
- touches alternées rouges et blanches
- chaque groupe de cellules est rappelé par son nom au dessus de chaque compteur
- 2 manettes de remise à zéro pour les compteurs et pour le totalisateur de part et d'autre du compteur
- alarme sonore indiquant le passage à 100 d'un des compteurs

	compteur 5 touches et totalisateur	compteur 8 touches et totalisateur
touches de comptage de cellules	baso - éosin - seg lymph - mono	baso - éosin - seg lymph - mono - myélo juven - stab
dimensions (LxIxh)	250 x 76 x h56 mm	320 x 76 x h56 mm
Compteurs hématologiques	MC1605	MC1608

Compteurs différentiels digitaux

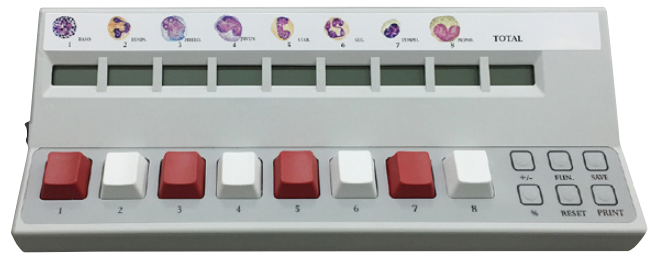

- clavier 8 touches blanches et rouges
- écran LCD à 3 chiffres devant chaque touche
- comptage simple et précis
- étiquettes avec illustration des cultures cellulaires en face de chaque touche
- bip à chaque pression
- alarme déclenchée à partir d'un incrément de 100 au-delà du compte total
- calcul de pourcentages
- réglage du contraste et affichage du niveau de la batterie
- dim. 245 x 94 x h48 mm
- alimentation : 240 V
- **modèle standard**
- **modèle avec interface RS232** : possibilité de connecter une imprimante et un lecteur de carte SD, fonctions d'impression et de sauvegarde des données

référence **Prix HT**
MC1700 Compteur différentiel standard
MC1705 Compteur différentiel avec interface RS232 [1](#)