



Hottes aspirantes filtrantes autonomes et portatives à recyclage ou rejet extérieur

Hotte mobile "valise"

- faible encombrement
- importante surface d'aspiration



1

- hotte portable, facile à déplacer
- manipulation de produits, fumées de soudure ou autres, application de solvants, nettoyages de pièces, etc.
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm
- en option, visières entonnoirs en PVC translucide, épaisseur 5 mm



4



5

Filtration

Chaque hotte doit être complétée par un filtre et éventuellement un pré-filtre :

- en recyclage d'air filtré, avec rejet dans le local :

- **FT131** : filtre au charbon actif pour solvants, gaz et fumées
- **FT130** : pré-filtre pour protéger le filtre FT131 des risques de colmatage
- **FT132** : filtre anti-poussière pour particules Ø < 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.
- **FT133** : filtre anti-poussière pour particules Ø > 1 µm en suspension dans l'air issues de manipulation de poudres, grattages etc.

- en rejet vers l'extérieur avec une gaine d'évacuation Ø125 mm

- **FT133** : filtre pour particules Ø > 1 µm, obligatoire pour rejeter vers l'extérieur les produits filtrés

Hotte à visière

- protection totale du visage




2

- pour produits volatils
- légère et maniable
- protection totale du visage
- visière réglable en hauteur
- angle de visière translucide avec éclairage intégré anti-éblouissement
- caisson en polypropylène
- sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm




Hotte cabine pyramide rehaussée

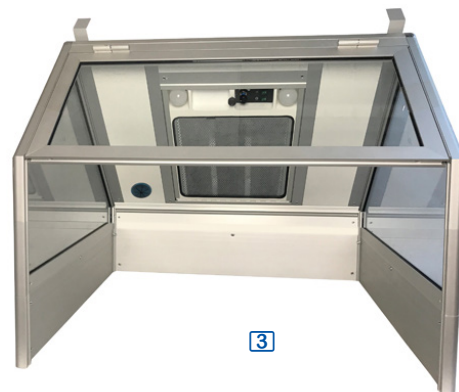

3

- structure en aluminium, panneaux en mélaminé, vitrage trempé
- ouverture du passage de la main 340 mm
- porte relevable
- permet d'opérer au-dessus du produit grâce à la protection de la vitre
- peut être utilisée :
 - en recyclage, avec filtre au charbon actif, filtre à particules ou filtre HEPA H14 en option
 - en rejet extérieur (filtre à poussières et sortie pour l'évacuation de l'air Ø 125 mm)
- possibilité d'utiliser des préfiltres de protection pour augmenter la longévité du système de filtration principal

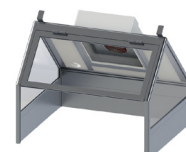

	hotte "valise"	hotte à visière	hotte pyramide
débit réglable	50 à 450 m³/h	50 à 450 m³/h	50 à 450 m³/h
éclairage intégré	anti-éblouissement	anti-éblouissement	LED
sortie évacuation air	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
dimensions (lxpxh)	350 x 200 x h430 mm	350 x 500 x h470 mm	800 x 700 x h700 mm
poids	9 kg	9 kg	30 kg
alimentation / puissance	230 V / 270 W	230 V / 270 W	230 V / 80 W
Hottes aspirantes	FT1010 1	FT100 2	FT1060 3
accessoires			
pré-filtre de protection G3 (les 10)	FT130	FT130	FT130
filtre au charbon actif	FT131	FT131	FT131
filtre anti-poussière M5	FT132	FT132	FT132
filtre pour rejet vers l'extérieur G4	FT133	FT133	FT133
filtre HEPA H14			FT134
petite visière 340 x 260 x h 340 mm	FT1001 4	FT1001 4	FT1001 4
grande visière 610 x 320 x h 610 mm	FT1002 5	FT1002 5	FT1002 5