

i

Robinetts eau pour paillasse


- en laiton (sauf modèles pour eau distillée)
- bec démontable
- embout cannelé démontable Ø 10 mm
- joints d'étanchéité élastomère en EPDM
- poignée de robinet en polypropylène

résistant aux acides, couleur selon norme EN 13792

- saillie (S) : 80 à 200 mm suivant modèle, autres longueurs sur demande
- autres modèles sur demande
- **tous les modèles sont livrés avec flexible de raccordement au réseau d'alimentation d'eau en inox tressé, raccord 1/2" femelle (15/21)**

Robinetts eau froide

Robinetts droits fixes

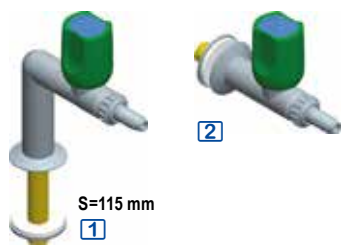


référence Prix HT

FCE2101 **1** Robinet droit eau froide, montage sur table

FCE2201 **2** Robinet droit eau froide, montage sur dossieret

Robinetts eau distillée

Robinetts droits fixes

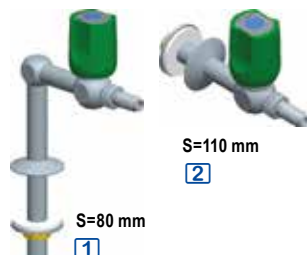


référence Prix HT

FCE2105 **1** Robinet droit, montage sur table

FCE2205 **2** Robinet droit, montage sur dossieret

Robinetts 90°

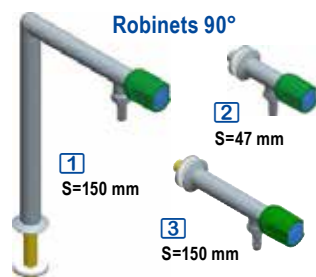


référence Prix HT

FCE2102 **1** Robinet 90° montage sur table, Saillie 150 mm

FCE2202 **2** Robinet 90°, sur dossieret, Saillie 47 mm

AN4014 **3** Robinet 90°, sur dossieret, Saillie 150 mm

Robinetts 90°

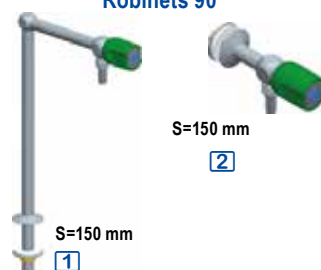

référence Prix HT

FCE2106 **1** Robinet 90°, montage sur table

FCE2206 **2** Robinet 90°, montage sur dossieret

Robinetts col de cygne orientable



référence Prix HT

FCE2103 **1** Robinet col de cygne, montage sur table

FCE2203 **2** Robinet col de cygne, montage sur dossieret

Robinet col de cygne orientable




référence Prix HT

FCE2107 Col de cygne orientable, montage sur table

i

Robinetts gaz pour paillasse

- en laiton, coloris gris
- embout cannelé fixe Ø 7 mm
- poignée en polypropylène résistant aux acides
- saillie : 110 à 120 mm suivant modèle
- **autres modèles sur demande**

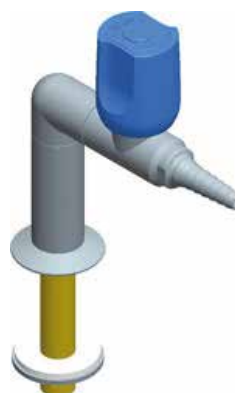

Modèles avec robinet à 45° sur table ou sur dossieret disponibles sur demande.

- tête céramique avec déclic de sécurité pour les gaz combustibles, tête de régulation fine en PTFE pour les gaz techniques, tête lubrifiée avec graisse spéciale pour les robinets à oxygène

- couleur bleue ou jaune selon norme EN 13792, pastilles d'identification selon gaz distribué
- pression maximum : 7 bar pour les gaz techniques, 0,2 bar pour les gaz combustibles

	robinets droits	
	montage sur table	montage sur dossieret
Robinetts pour gaz techniques		
Azote (N ₂)	FCT2131	FCT2231
Air comprimé	FCT2132	FCT2232
Oxygène (O ₂)	FCT2133	FCT2233
Di oxyde de carbone (CO ₂)	FCT2134	FCT2234
Argon (Ar)	FCT2135	FCT2235
Hélium (He)	FCT2136	FCT2236
Vide	FCT2137	FCT2237
	montage sur table	montage sur dossieret
Robinetts pour gaz combustibles		
Gaz naturel	FCC2131	FCC2231
Propane/ butane	FCC2132	FCC2232
Méthane	FCC2133	FCC2233
Propane	FCC2134	FCC2234
Butane	FCC2135	FCC2235