

Tubes de prélèvement par aspiration pour liquides



i Pour liquides visqueux.

- **prélèvements faciles en un point déterminé par aspiration** (principe de la seringue)
- **applications** : boues, huiles, émulsions, crèmes, etc.
- **fabrication haute qualité** pour des prélèvements purs : matière plastique inerte à haut degré de pureté, démontage rapide, entretien facile (parois lisses)
- tubes de prélèvement en **polypropylène** ou en **Téflon® transparent**
- dim. : Ø 25 mm, longueur 60, 100 ou 200 cm
- poignée d'aspiration rouge
- résistance aux produits chimiques classiques
- stérilisables (+121°C)
- incassables

longueur	capacité	tubes en polypropylène	tubes en Téflon®
60 cm	150 ml	B53330P	B53330T
100 cm	250 ml	B53331P	B53331T
200 cm	500 ml	B53332P	B53332T



Tubes de prélèvement pour liquides



- ▶ **prélèvement d'une colonne liquide verticale, parfaitement représentative**
- ▶ **prélèvement à une profondeur déterminée**
- ▶ **pour récipients profonds**

- permet de découper une colonne liquide verticale, l'échantillon est ainsi parfaitement représentatif de toute la hauteur de la citerne ou du récipient
- **prélèvement d'une section** : plonger le tube, soupape ouverte, le liquide s'introduit dans le tube, fermer la soupape et retirer le tube
- **prélèvement à une profondeur déterminée** : marquer la profondeur sur le tube, fermer la soupape, plonger le tube jusqu'à la marque, ouvrir la soupape pour remplir le tube, puis la refermer et retirer le tube
- en polypropylène transparent Ø 22 mm, 3 longueurs 0,5 m, 1 m ou 2 m

longueur	référence	Prix HT
0,5 m	B561550	
1,0 m	B5615100	
2,0 m	B5615200	




Préleveurs à valve pour liquides




i Prélèvement en récipients, bouteilles, etc.

- préleveurs cylindriques équipés d'une valve située sous le cylindre
- **commandés d'une seule main** pour effectuer des prélèvements à profondeur déterminée mais également pour évacuer directement l'échantillon dans un tube ou une bouteille
- en acier inox AISI 304
- modèle 50 ml, long. 460 mm
- modèle 100 ml, long. 540 mm

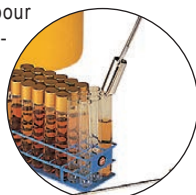

capacité	référence	Prix HT
50 ml	B53261	
100 ml	B53262	

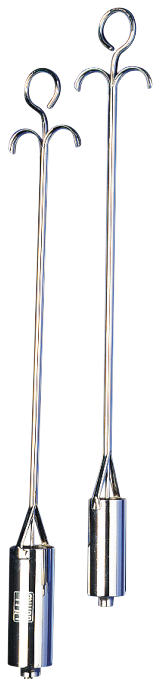

Tubes de prélèvement rapide pour liquides



👍 S'utilisent d'une seule main !

- ▶ **prélèvement d'une colonne de liquide verticale ou en un point donné**

- prélèvements rapides et efficaces
- commande de l'ouverture de l'orifice du tube par un bouton poussoir actionné par le pouce de la main qui tient le tube
- tubes Ø 25 mm transparents
- surface extérieure et parois lisses
- plastiques inertes à haut degré de pureté
- démontage et entretien faciles
- résistance aux produits chimiques classiques
- stérilisables à +121°C
- incassables



longueur	capacité	tubes en polypropylène	tubes en Téflon®
60 cm	150 ml	B53310P	B53310T
100 cm	250 ml	B53311P	B53311T
200 cm	500 ml	B53312P	B53312T

