


### Conteneurs à déchets en carton pour DASRI

► pour les déchets d'activité de soins à risques infectieux



Système de fermeture du sac intégré au rabat du conteneur.

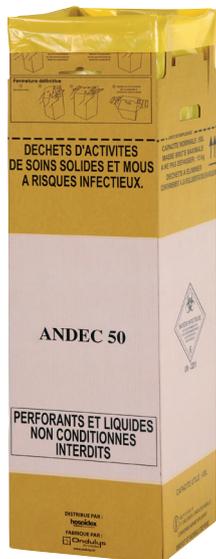

- conteneurs en carton ondulé épaisseur 3 mm
- fond à montage automatique
- conformes aux normes **AFNOR Q 12-008**
- couverture en papier kraft pur à l'extérieur
- sachet intérieur en polyéthylène basse densité jaune 60 µm collé sur les parois
- découpe des bords du carton soignée : utilisation sans risques de coupures
- résistance au gerbage : > 120 kg par caisse
- deux poignées sur le dessus avec système de protection des doigts
- fermeture provisoire du couvercle pendant l'utilisation : limite les remontées d'odeur, fermeture définitive par double rabat pour une meilleure sécurité

- 4 épaisseurs de carton en fond de caisse pour amortissement de la chute des premiers déchets
- livrés à plat et assemblés en quelques secondes, instructions d'utilisation et pictogrammes imprimés sur le conteneur
- fermeture du sac : une ouverture placée dans le premier rabat du carton permet le passage et le maintien fermé du rebord du sac par un lien traditionnel (livré)



capacité	dimensions (lxpxh)	charge max.	référence	Prix HT
50 litres	260 x 260 x 745 mm	12,5 kg	ANDEC50 [2] les 10	

### SharpSafe® conteneurs de sécurité NF X 30-500

- récupération des déchets tranchants ou contaminés (y compris des aiguilles)
- résistance aux chocs, perforations et solvants



Sécurité maximum pour les utilisateurs et pour l'environnement.



- conteneurs certifiés **NFX 30-500** : sécurité optimale pour les utilisateurs et pour l'environnement (qualité en conformité avec les recommandations du GERES/circulaire DH/S12 - DGS/VS3 n°554 du 01/09/98, résistance à la perforation de 12,5 N mini. 15 N en moyenne)
- en **polypropylène rigide**, résistant aux chocs, aux objets tranchants ou perforants, ainsi qu'aux solvants
- deux fermetures : une provisoire et une définitive
- autoclavables à +121°C et incinérables




**Type A :** ouverture ovale pour les corps de seringues



**Type B :** extraction des aiguilles avec un système anti-retour



**Type C :** extraction des aiguilles et cassure des lames bistouri

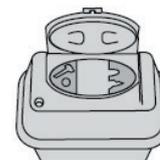

**Type D :** 5 ouvertures :  
1 pour éléments de taille moyenne,  
1 pour casser les lames de bistouri,  
1 pour extraction d'aiguilles sanguines et cônes type Luer,  
1 pour aiguilles et papilles,  
1 pour stylos à insuline

capacité	dimensions (lxpxh)	couvercle	transport	référence	Prix HT
0,20 litre	79 x 37 x 146 mm	type A	-	AX1014 [1]	
0,45 litre	105 x 50 x 167 mm	type C	anse	AX1016 [3]	
0,60 litre	106 x 54 x 221 mm	type A	anse	AX1020 [4]	
1 litre	106 x 90 x 188 mm	type A + C	crochet	AX1050 [5]	
2 litres	196 x 120 x 168 mm	type D	-	AX1100 [6]	
4 litres	175 x 175 x 248 mm	type D	anse	AX1200 [7]	
7 litres	175 x 175 x 382 mm	type D	-	AX1300 [8]	