

Incubateur réfrigéré à agitation EnviroGenie® plate-forme magnétique


| | | | |
|--|-------------|------------|------------|
| vitesse réglable | charge maxi | temp. mini | temp. maxi |
| 1 à 35 tr/min 2 à 70 osc/min 1 à 2000 tr/min | 4,5 kg | +4°C | +75°C |

- chauffe, refroidit, et permet des mouvements de balançoire (10°), de rotation (360°) et d'agitation magnétique
- ventilation forcée : excellente homogénéité
- affichage digital vitesse et température
- vaste gamme d'accessoires
- mouvement 3D : le plateau spécial SN2501 transforme le secoueur en secoueur 3D



| | | |
|-------------------------------|--|--|
| température | +4 à +75°C | |
| vitesse réglable | rotation balançoire agitation magnétique | 1 à 35 tr/min 2 à 70 osc/min 1 à 2000 tr/min |
| dimensions internes | 24 litres 254 x 362 x h260 mm | |
| température | +28 à +75°C ± 0,2°C | |
| stabilité / uniformité | ± 0,1°C / ± 0,5°C | |
| chargement maximum | 4,5 kg | |
| angle | 10° | |
| dimensions (lpxh) | 495 x 622 x h368 mm | |
| poids | 36 kg | |
| alimentation | 230 V / 50 Hz | |
| Incubateur EnviroGenie® | SN2600 | |
| plate-forme agitation 3D | SN2501 [1] | |
| étagère-grille supplémentaire | SN2502 [2] | |

- livré complet avec :
1 plate-forme magnétique,
4 bandes magnétiques inox pour fixer des sachets 150 x 150 mm **[9]**,
1 plateau magnétique anti-dérapant **[10]**,
portoirs magnétiques avec pinces :
1 portoir 12 pinces pour tubes Ø10/13 mm **[3]**,
1 portoir 6 pinces pour tubes Ø15/17 mm **[4]**,
1 portoir 3 pinces pour tubes Ø28/30 mm **[5]**,
1 étagère-grille empilable **[2]**
- les bandes, portoirs et plateaux aimantés se fixent sur la plate-forme magnétique, possibilité de fixer plusieurs dispositifs ensemble

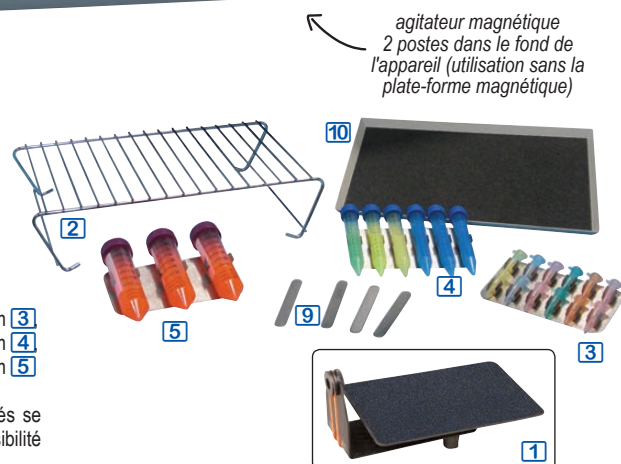

Accessoires supplémentaires pour plates-formes magnétiques

Portoirs magnétiques à pinces, pour tubes



| Plateaux | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|--|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | à l'unité | | pack de 6 |
| Portoirs 12 pinces, tubes Ø10/13 mm | [3] SN1101 | l'unité | SN1111 | les 6 |
| Portoirs 6 pinces, tubes Ø15/17 mm | [4] SN1102 | l'unité | SN1112 | les 6 |
| Portoirs 3 pinces, tubes Ø28/30 mm | [5] SN1103 | l'unité | SN1113 | les 6 |
| Portoirs 2 pinces, tubes à hybridation | [6] SN1104 | l'unité | - | - |
| Portoirs 6 pinces, fioles 100 ml | [7] SN1105 | l'unité | - | - |
| Portoir universel + 2 élastiques | [8] SN1106 | l'unité | - | - |

Bandes magnétiques pour sachets



| référence | Prix HT |
|-----------|----------------------------|
| SN1109 | Bandes magnétiques, les 16 |

Boîtes magnétiques pour microtubes



| référence | Prix HT |
|-----------|----------------------------------|
| SN1114 | Boîte 50 microtubes [11] |
| SN1115 | Boîte 100 microtubes [12] |