


Dessiccateurs sous vide en polycarbonate

**PLASTIQUE**  
polycarbonate

- couvercle étudié pour optimiser le volume intérieur
- peut maintenir un vide de 740 mm Hg pendant 24 heures
- aucun risque d'implosion
- robinet en polypropylène avec pointeau Téflon®, rotation parfaite permettant une entrée d'air très progressive, poignée rouge très visible, raccord pour tube Ø int. 6,4 mm (1/4")
- poignée supérieure centrée
- étanchéité assurée par un joint en néoprène, joint non altéré par les basses températures (jusqu'à 0°C)
- livrés avec plaque perforée en polypropylène, épaisseur 3,2 mm et perforations Ø 3,2 mm

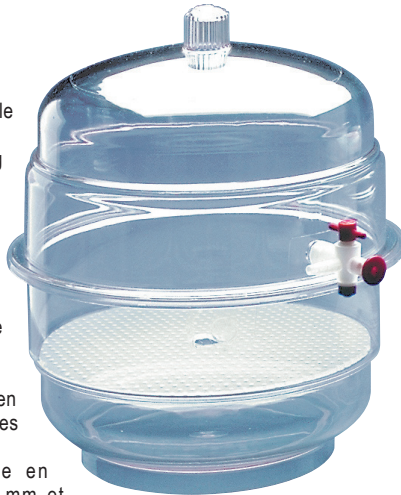


Ø intérieur	hauteur utile*	dim. externes	référence	Prix HT
Ø 149 mm	122 mm	Ø 172 x h206 mm	F42012	
Ø 197 mm	157 mm	Ø 230 x h260 mm	F42022	
Ø 240 mm	199 mm	Ø 273 x h311 mm	F42027	

\* Hauteur disponible au-dessus de la plaque perforée.

Azlon®

**PLASTIQUE**  
polycarbonate

- haute résistance aux chocs et longue durée de vie
- résistent aux fortes dépressions, en toute sécurité
- plaque en céramique permettant l'utilisation de creusets incandescents
- livrés complet, avec couvercle, base, plaque et robinet

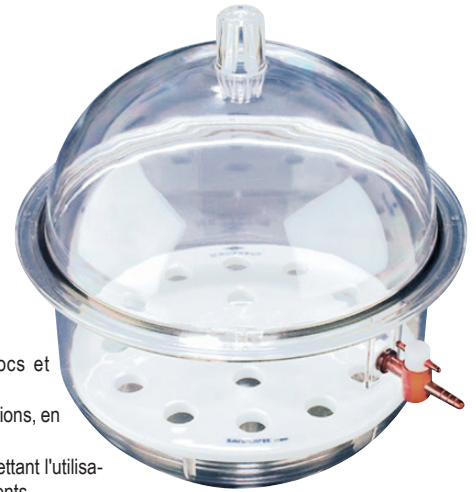


Ø int. x hauteur utile	Ø plaque	référence	Prix HT
Ø 215 x 262 mm	205 mm	SW4801	
Ø 245 x 296 mm	236 mm	SW4811	

\* Hauteur disponible au-dessus de la plaque perforée.

Cartouches de dessiccation prêtes à l'emploi



Ne changez plus le dessiccant de votre dessiccateur à la main : utilisez les nouvelles cartouches prêtes à l'emploi.

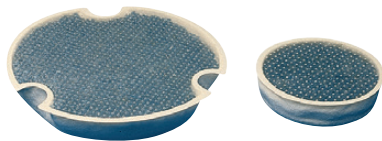

- régénérables : quand le dessiccant devient rose, il faut le régénérer, il devient à nouveau bleu
- cartouches prêtes à l'emploi, plus de manipulations désagréables, plus de nettoyage, plus de poussière
- le dessiccant est contenu dans une cartouche fermée par une feuille de mylar perforée
- pour régénérer : placez la cartouche complète, feuille perforée vers le bas, dans une étuve ventilée, pendant 3 heures à +150°C

diamètre	espace traité	référence	Prix HT
Ø 114 mm	0,03 m³	F42045160	
Ø 197 mm	0,05 m³	F42045200	



Dessiccateurs coffres et armoires dans ce catalogue...



voir page 876