


Distributeurs répétitifs pour liquides agressifs Dispensette® S et Dispensette® S Organique

- ▶ réglage confortable
- ▶ aspiration simple
- ▶ distribution sûre
- ▶ purge rapide

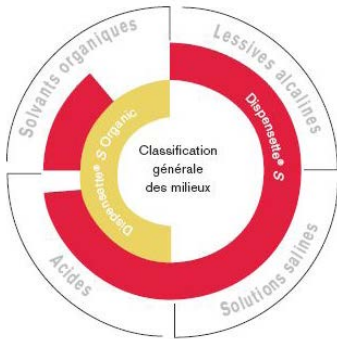


- très large gamme d'application :
Dispensette® S : acides, solutions salines et solvants organiques
Dispensette® S Organique : solvants organiques et acides concentrés

- 3 versions de distributeurs : à volume fixe, analogiques à volume variable, digitaux à volume variable
- tube d'aspiration télescopique adaptable à différentes hauteurs de flacon
- soupapes d'aspiration avec olive pour un bon maintien du tube d'aspiration
- soupape d'éjection avec bille de sécurité : assure la fermeture lorsque la canule de distribution n'est pas montée, sans joint d'étanchéité : simplifie le nettoyage

- canule de distribution, avec ou sans soupape de purge, suivant modèle, les modèles avec soupape de purge ont un tube pour distribution inversé
- désassemblage facile pour le nettoyage
- autoclavable à +121°C
- conformes BPL
- bloc de soupapes avec filetage GL45, orientable à 360° : l'étiquette du flacon reste toujours visible
- filetage GL45 et adaptateurs fournis :

- compatibles avec les flacons de réactif les plus courants
- vaste gamme d'accessoires pour des dosages spéciaux :
distribution de séries, de milieux stériles, de milieux sensibles, dans des tubes à essais étroits, dans des grands bidons
- livrés avec certificat de qualité, tube d'aspiration télescopique, clé de montage et adaptateurs en PP

Accessoires (voir tableau ci-contre)

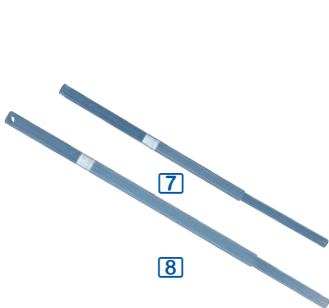

- tubes d'aspiration télescopiques, longueur réglable



- tuyau de distribution flexible, avec soupape de purge, en PTFE, spiralé, 800 mm, avec manette de sécurité



- joint pour bloc de soupapes, en PTFE, pour milieux très volatils



- canules de distribution, standard ou étirées, avec ou sans soupape de purge, capuchon à vis en PP

Distributeurs à volume fixe

Distributeurs analogiques

Distributeurs digitaux

- applications standard
- ajustage simple avec une clé d'ajustage



- réglage rapide du volume de distribution grâce à une barre dentée située à l'intérieur



- affichage digital, réglable du volume de distribution rapide, précis et reproductible, sans outil



capacité subdivisions exact. stabilité tuyau aspiration adaptateurs livrés					Distributeurs standard		Distributeurs AVEC soupape de purge		
					Dispensette® S	Dispensette® S organique	Dispensette® S	Dispensette® S organique	
▼ distributeurs à volume fixe									
1 ml		±0,6%	±0,2%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD7101	-	BD7111	-
2 ml		±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD7102	-	BD7112	-
5 ml		±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD7103	BD7203	BD7113	BD7213
10 ml		±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD7104	BD7204 1	BD7114 2	BD7214
capacité au choix de 0,5 à 100 ml, volume fixe						BD7105	BD7205	BD7115	BD7215
▼ distributeurs analogiques									
0,1- 1ml	0,02 ml	±0,6%	±0,2%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD8101	-	BD8111	-
0,2- 2ml	0,05 ml	±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD8102	-	BD8112	-
0,5- 5ml	0,1 ml	±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD8103	BD8203	BD8113	BD8213
1 - 10ml	0,2 ml	±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD8104	BD8204 3	BD8114 4	BD8214
2,5- 25ml	0,5 ml	±0,5%	±0,1%	170-330 mm	GL32-GL38-S40	BD8105	BD8205	BD8115	BD8215
5 - 50ml	1,0 ml	±0,5%	±0,1%	170-330 mm	GL32-GL38-S40	BD8106	BD8206	BD8116	BD8216
10 -100ml	1,0 ml	±0,5%	±0,1%	170-330 mm	GL32-GL38-S40	BD8107	BD8207	BD8117	BD8217
▼ distributeurs digitaux									
0,1- 1ml	0,005 ml	±0,6%	±0,2%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD9101	-	BD9111	-
0,2- 2ml	0,01 ml	±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD9102	-	BD9112	-
0,5- 5ml	0,02 ml	±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD9103	BD9203	BD9113	BD9213
1 - 10ml	0,05 ml	±0,5%	±0,1%	125-240 mm	GL25-GL28-GL32-GL38-S40	BD9104 5	BD9204	BD9114	BD9214 6
2,5- 25ml	0,1 ml	±0,5%	±0,1%	170-330 mm	GL32-GL38-S40	BD9105	BD9205	BD9115	BD9215
5 - 50ml	0,2 ml	±0,5%	±0,1%	170-330 mm	GL32-GL38-S40	BD9106	BD9206	BD9116	BD9216
accessoires pour distributeur de volume 1 à 10 ml									
Canules de distribution	standard					BD4901	BD4902	BD4903	BD4904
	étirées					BD4905	-	BD4907	-
Tubes d'aspiration télescopiques Ø. 6 mm	longueur 70-140 mm	7				BD4921	BD4921	BD4921	BD4921
	longueur 125-240 mm	8				BD4922	BD4922	BD4922	BD4922
	longueur 195-230 mm					BD4923	BD4923	BD4923	BD4923
	longueur 250-480 mm					BD4924	BD4924	BD4924	BD4924
Tuyau de distribution flexible spiralé avec soupape de purge						9	BD4931	BD4931	BD4931
Joint pour bloc de soupapes en PTFE						10	BD4941	BD4941	BD4941
accessoires pour distributeur de volume 25 à 100 ml									
Canules de distribution	standard					BD4911	BD4912	BD4913	BD4914
	étirées					BD4915 11	BD4916 12	BD4917 13	BD4918 14
Tubes d'aspiration télescopiques Ø. 7,6 mm	longueur 170-330 mm					BD4925	BD4925	BD4925	BD4925
	longueur 250-480 mm					BD4926	BD4926	BD4926	BD4926
Tuyau de distribution flexible spiralé avec soupape de purge						BD4932	BD4932	BD4932	BD4932
Joint pour bloc de soupapes en PTFE						10	BD4941	BD4941	BD4941