

Distributeurs répétitifs Dispensette® S Trace Analysis pour produits chimiques extrêmement purs

► distribution de volumes précis de milieux extrêmement purs dans l'analyse des traces

- distributeurs analogiques
- volume réglable de 1 à 10 ml grâce à une barre dentée interne
- canule de distribution 105 mm avec ou sans soupape de purge, suivant modèle
- système de soupape sans joint d'étanchéité
- matériaux en contact avec le milieu : PTFE, ETFE, PCTFE, FEP et PFA; ressort des soupapes en platine iridiée ou Tantale, suivant modèle


compatibilités

ressort	Platine iridié	Tantale
Acide acétique	✓	✓
Acide chlorhydrique	✓	✓
Acide fluorhydrique	✓	✗
Acide nitrique	✓	✓
Acide perchlorique	✓	✓
Acide phosphorique	✓	✓
Acide sulfurique	✓	✓
Brome	✓	✓
Eau	✓	✓
Peroxyde d'hydrogène	✗	✓
Solution d'ammoniaque	✓	✓
Soude caustique, 30%	✓	✗

- l'unité de distribution complète peut être remplacée sans outil, après remplacement aucun calibrage n'est nécessaire
- procédé de nettoyage avant utilisation dans l'analyse des traces décrit dans le mode d'emploi
- bloc de soupapes avec filetage GL45, remplaçable, orientable à 360° : l'étiquette du flacon reste toujours visible
- filetage GL45 et adaptateurs fournis : compatibles avec les flacons de réactif les plus courants
- tube d'aspiration télescopique adaptable à différentes hauteurs de flacon
- livrés avec certificat de qualité, clé de montage, tube d'aspiration télescopique, tube pour distribution inversé et adaptateurs en PP



Accessoires

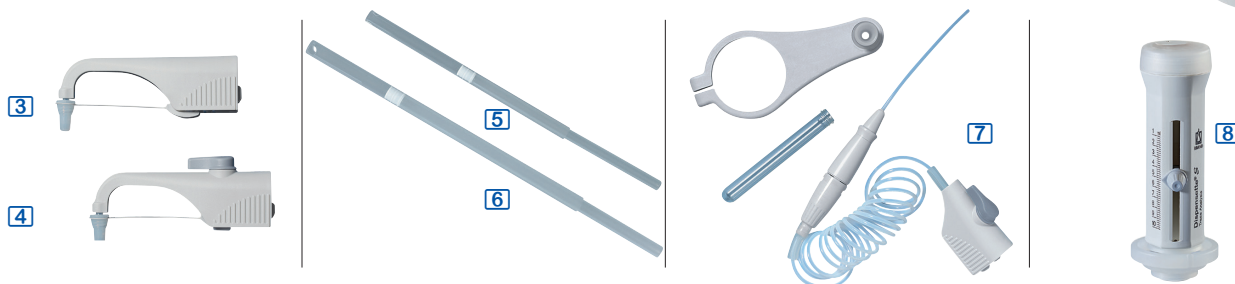

capacité	ressort de soupape	subdivisions	exact.	stabilité	tuyau aspiration	adaptateurs livrés	Distributeurs standard	Distributeurs AVEC soupape de purge	
1 - 10 ml	Platine iridié	0,2 ml	±0,5%	±0,1%	125 - 240 mm	GL28-S28-GL32-S40	BD9510 [1]	BD9520 [2]	
1 - 10 ml	Tantale	0,2 ml	±0,5%	±0,1%	125 - 240 mm	GL28-S28-GL32-S40	BD9515	BD9525	
accessoires pour distributeur de volume 1 à 10 ml									
Canules de distribution 105 mm							ressort en platine iridié	BD9501 [3]	BD9503 [4]
							ressort en Tantale	BD9502	BD9504
							longueur 70-140 mm [5]	BD4921	BD4921
							longueur 125-240 mm [6]	BD4922	BD4922
							longueur 195-230 mm	BD4923	BD4923
							longueur 250-480 mm	BD4924	BD4924
Tuyau de distribution flexible spiralé avec soupape de purge							[7]	BD4931	BD4931
Unité de distribution							[8]	BD9506	BD9506