


## Tubes cryogéniques **stériles** en PP

- ▶ jusqu'à -196°C
- ▶ certifiés sans RNase, DNase, pyrogènes

- stockage cryogénique -196°C
- parfaitement transparents
- large zone de marquage
- graduations imprimées
- doublure en silicone étanche montée dans le capuchon
- filetage interne ou externe
- autoclavables à +121°C
- les modèles avec filetage interne permettent un gain de place dans les cryoboîtes
- les modèles avec filetage externe sont plus faciles à utiliser avec des gants et comportent moins de risque de contamination croisée

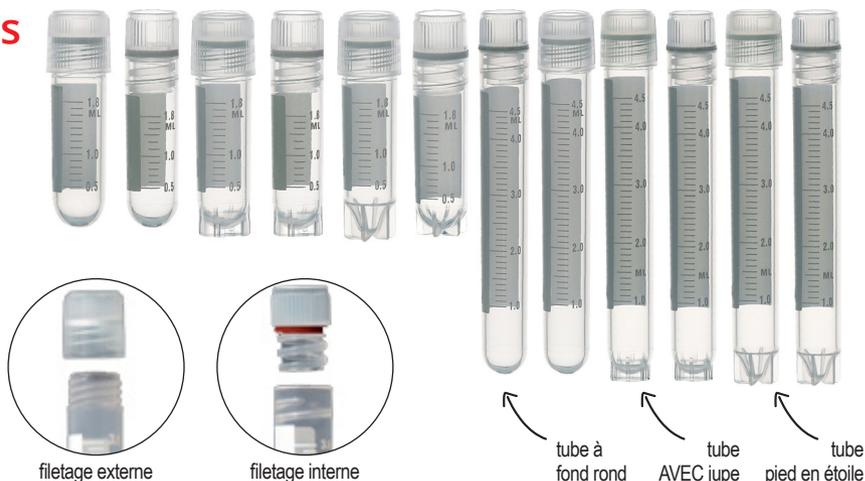

capacité	dim. (Ø x h mm)	filetage externe		
		tubes à FOND ROND	tubes AVEC JUPE	tubes PIED EN ÉTOILE
1 ml	Ø 12,4 x h41,0 mm	-	LMR4007 les 50	-
2 ml	Ø 12,4 x h48,5 mm	LMR4001 les 50	LMR4003 les 50	LMR4005 les 50
4 ml	Ø 12,4 x h70,3 mm	-	LMR4008 les 25	-
5 ml	Ø 12,4 x h91,3 mm	LMR4002 les 25	LMR4004 les 25	LMR4006 les 25
capacité	dim. (Ø x h mm)	filetage interne		
		tubes à FOND ROND	tubes AVEC JUPE	tubes PIED EN ÉTOILE
1 ml	Ø 12,3 x h41 mm	-	LMR4015 les 50	-
2 ml	Ø 12,3 x h49 mm	LMR4012 les 50	LMR4016 les 50	LMR4020 les 50
4 ml	Ø 12,3 x h70,3 mm	-	LMR4017 les 25	-
5 ml	Ø 12,4 x h91,3 mm	LMR4014 les 25	LMR4018 les 25	LMR4022 les 25

## Inserts de couleur pour capuchons



- en polypropylène
- s'insèrent dans le capuchon du cryotube
- petit trou pour un retrait facile du capuchon

coloris	référence	Prix HT
blanc	CT4630 les 100	
bleu	CT4631 les 100	
rouge	CT4632 les 100	
vert	CT4633 les 100	
jaune	CT4634 les 100	