

Incubateurs à agitation porte vitrée, grande capacité

vitesse max.

250 tr/min



temp. max.

+ 70°C

- construction robuste en acier
- régulateur électronique de température
- affichage digital : température, vitesse d'agitation et temps d'agitation
- minuterie intégrée : 1 min à 999 heures
- alarme visuelle et sonore en fin de cycle
- convection forcée : ventilateur de circulation d'air intégré,

- parfaite homogénéité de la température dans la chambre
- interface RS232C : contrôle de la température et de l'agitation via un PC grâce au logiciel Labworldsoft
- incubateurs livrés avec couvercle panoramique, sans plateau ni accessoire



1

volume utile	45 litres	68 litres	150 litres
capacité	2 plateaux (tubes haut. < 150 mm)	1 plateau	2 plateaux (tubes haut. < 180 mm)
température	ambiante+8°C à +70°C (±0,2°C)	ambiante+8°C à +70°C (±0,2°C)	ambiante+8°C à +70°C (±0,2°C)
dim. interne	420 x 270 x 320 mm	450 x 450 x 338 mm	674 x 540 x 430 mm
plateforme d'agitation	420 x 270 mm	450 x 450 mm	674 x 540 mm
charge max.	12 kg	12 kg	20 kg
orbite	Ø 25 mm	Ø 30 mm	Ø 25 mm
vitesse	20 à 250 tr/min	20 à 250 tr/min	20 à 250 tr/min
dim. ext. / poids	710 x 650 x 710 mm / 70 kg	559 x 687 x 628 mm / 41,5 kg	930 x 890 x 820 mm / 135 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
incubateurs à agitation	GF3032	GF3031 1	GF3033


plateaux d'agitation de base



- plateau en inox ou aluminium, perforé pour la fixation de divers accessoires : pinces pour erlens, portoirs pour tubes

Plateaux de base	réf	Prix HT
Plateau inox 450x300mm pour GF3032	GF3970	
Plateau inox 450x450mm pour GF3031	GF3960	
Plateau alu. 674x540mm pour GF3033	GF3980	

support antidérapant pour GF3031

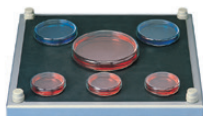

- plateau géant, mouvement doux et régulier pour cultures cellulaires, milieux de culture, etc.
- surface de pose : 420 x 420 mm


référence	Prix HT
GF3995 Support plateau	

pinces de fixation pour erlens



pour Erlen	pinces interchangeables			réf	Prix HT
	nombre max.				
	avec GF3960	avec GF3970	avec GF3980		
25 ml	79	52	99	GF10	
50 ml	49	35	99	GF11	
100 ml	36	22	50	GF12	
200 ml	22	15	26	GF13	
300 ml	16	13	26	GF14	
500 ml	12	10	26	GF15	
1000 ml	9	6	12	GF16	


plateaux et portoirs pour tubes

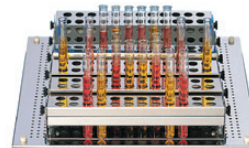

- portoirs de tubes en inox, inclinables jusqu'à 90°C
- capacité par portoir : 24 tubes Ø12 ou 16/17 mm
- capacité par plateau : 3 portoirs (plateau GF3970) et 6 portoirs (plateaux GF3980 et GF3960)

portoir inox 24 tubes	Prix HT
GF3955 Portoir inox 24 places	

support universel pour GF3031

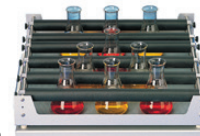

- dim. : 450 x 450 mm
- pour Erlen, ballons, tubes, etc.
- composé d'un support de base et de 6 rouleaux recouverts de caoutchouc

référence	Prix HT
GF3990 Support universel	