



**Burettes automatiques  
classe AS, robinet PTFE**

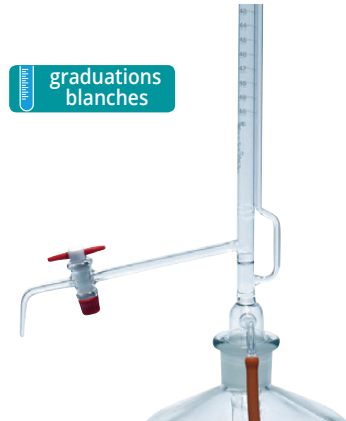

- conformes aux normes ISO 385 et DIN 12700
- robinet en PTFE
- un tube d'entrée d'air en partie inférieure de la burette est relié à une poire : une légère pression sur la poire permet de remplir la burette
- mise à zéro automatique : en relâchant la pression, le liquide en excédent retombe dans le flacon
- rodage 29/32
- poire et flacon à commander séparément

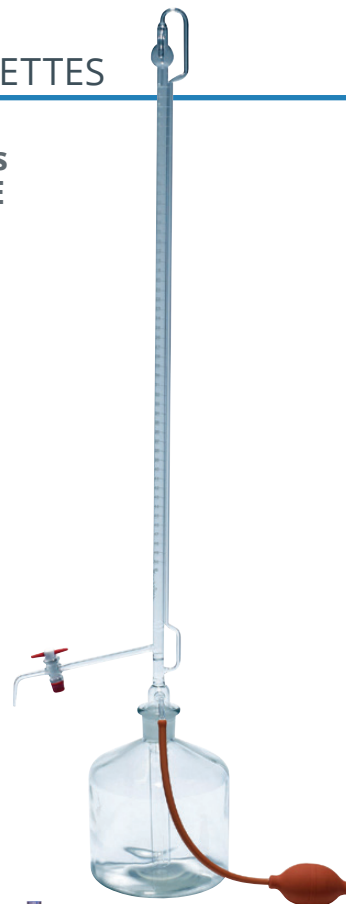

graduations blanches

- graduations émaillées blanches



graduations bleues  
bande Schellbach

- bande Schellbach avec ruban bleu central, graduations émaillées bleues



graduations bleues  
bande Schellbach

- robinet intermédiaire facilite le drainage du liquide en excédent vers le réservoir

capacité	grad.	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			burettes graduations blanches		burettes bande Schellbach graduations bleues		burettes bande Schellbach graduations bleues robinet intermédiaire	
10 ml	0,02 ml	±0,020 ml	GW4880		GW4883		GW4886	
25 ml	0,05 ml	±0,030 ml	GW4881		GW4884		GW4887	
50 ml	0,10 ml	±0,050 ml	GW4882		GW4885		GW4888	
<b>accessoires</b>								
flacon réservoir 2000 ml, rodage 29/32			1	GW4806		GW4806		GW4806
poire en caoutchouc			2	GW4807		GW4807		GW4807