


## Piège à froid

PYREX®

VERRE  
borosilicaté 3.3

- en verre borosilicaté 3.3
- pour utilisation avec système sous vide
- empêche les matériaux volatiles d'endommager les pompes
- utilisation simple : immerger le piège dans un vase de Dewar contenant un réfrigérant (glace carbonique par exemple); les matériaux volatiles qui passent à travers le système sont figés au niveau de la surface froide

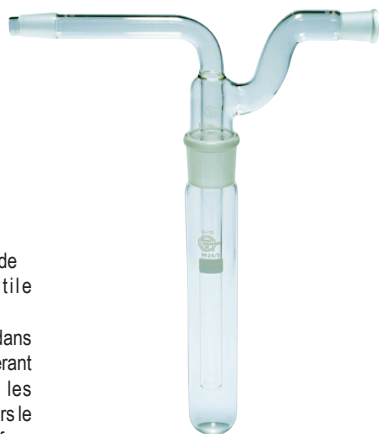

description	rodage femelle	rodage mâle	référence	Prix HT
tête de piège	19/26	34/35 et 19/26	<b>GW5900</b>	l'unité
corps de piège 250 mm	34/35	-	<b>GW5901</b>	les 5