

**Bouchons S60 avec entonnoir**

- bouchons en PP jaune
- insert tournant librement en PTFE blanc
- entonnoir fixe avec passoire, et robinet d'arrêt ou poignée automatique, suivant modèle
- connexion filetée GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- 2 connexions pour tubes capillaires livrées avec 6 raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6/2,2/3,2 mm et 1 obturateur pour connexion inutilisée
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



poignée d'arrêt automatique: le passage reste ouvert lorsque la poignée est maintenue appuyée

**Bouchon BW3602**

- 1 entonnoir à poignée automatique
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø1,6mm **verts**
- 2 raccords Ø2,2 mm **violet**s
- 2 raccords Ø3,2 mm **jaunes**
- 1 obturateur




**Bouchon BW3605**

- 1 entonnoir à robinet d'arrêt
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø1,6mm **verts**
- 2 raccords Ø2,2 mm **violet**s
- 2 raccords Ø3,2 mm **jaunes**
- 1 obturateur

**Bouchon S70 avec entonnoir**

- bouchons en PP gris
- insert tournant librement en PTFE blanc
- entonnoir fixe avec passoire et poignée d'arrêt automatique
- connexion filetée GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- 3 connexions pour tubes capillaires livrées avec 9 raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6/2,2/3,2 mm et 2 obturateurs pour connexions inutilisées
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm

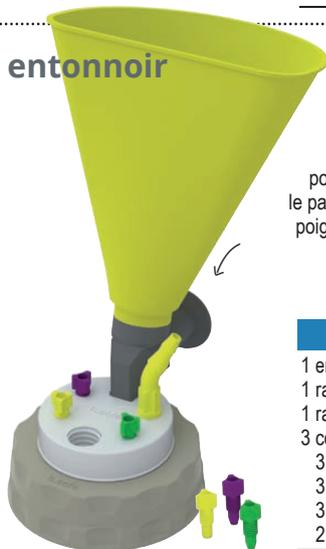

poignée d'arrêt automatique: le passage reste ouvert lorsque la poignée est maintenue appuyée

**Bouchon BW3715**

- 1 entonnoir à poignée automatique
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 3 connexions capillaires avec 3 raccords Ø1,6mm **verts**
- 3 raccords Ø2,2 mm **violet**s
- 3 raccords Ø3,2 mm **jaunes**
- 2 obturateurs



tous les entonnoirs sont équipés d'une passoire

**Bouchons B53 avec entonnoir**

- bouchons en PP gris
- insert tournant librement en PTFE blanc
- entonnoir fixe avec passoire, et robinet d'arrêt ou poignée automatique, suivant modèle
- connexion filetée GL14 pour le filtre à air destiné à absorber les vapeurs de solvant qui s'échappent lors de remplissage du récipient collecteur
- 2 connexions pour tubes capillaires livrées avec 6 raccords en PFA pour tubes Øext. 1,6/2,2/3,2 mm et 1 obturateur pour connexion inutilisée
- embout olive pour tubes Ø int. 5,5 à 8 mm



poignée d'arrêt automatique: le passage reste ouvert lorsque la poignée est maintenue appuyée

**Bouchon BW3532**

- 1 entonnoir à poignée automatique
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø1,6mm **verts**
- 2 raccords Ø2,2 mm **violet**s
- 2 raccords Ø3,2 mm **jaunes**
- 1 obturateur



**Bouchon BW3533**

- 1 entonnoir à robinet d'arrêt
- 1 raccord GL14
- 1 raccord olive Ø 5,5-8mm
- 2 connexions capillaires avec 2 raccords Ø1,6mm **verts**
- 2 raccords Ø2,2 mm **violet**s
- 2 raccords Ø3,2 mm **jaunes**
- 1 obturateur