

certification  
CE IVD 98/79

## Autotests Covid-19 Lituo® kit individuel

- ▶ **détection de la présence du virus par un auto-prélèvement nasal, moins profond que le prélèvement nasopharyngé classique**
- ▶ **résultat en 10 à 15 minutes**


- dépistage d'une infection en cours par le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19
- dépistage chez les personnes asymptomatiques et non contact à risque
- utilisation restreinte à la sphère privée.
- méthode de l'or colloïdal pour détection des protéines de la nucléocapside (protéine N).

### Contenu de la boîte individuelle :


- 1 écouvillon de prélèvement nasal
- 1 tampon d'extraction en tube
- 1 carte de détection
- 1 notice d'utilisation




Prix HT  
LMR1960 Kit de 1 autotest Lituo®

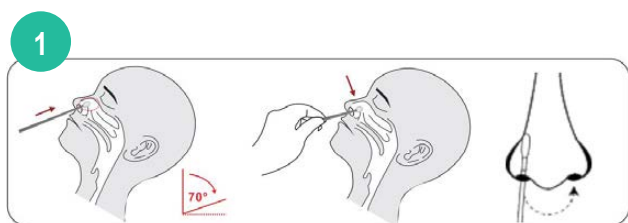


Réaliser le prélèvement nasal à l'aide de l'écouvillon

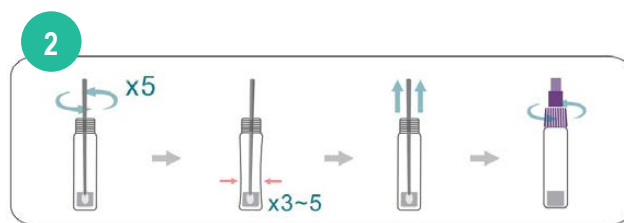


Extraire l'échantillon

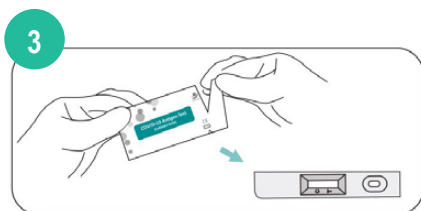


Retirer la cassette de test de son emballage

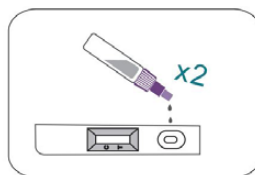

Distribuer 2 gouttes de la solution dans le puit d'échantillon de la cassette

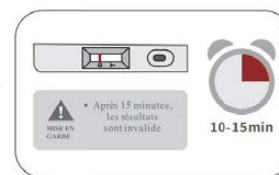

Lire les résultats dans les 10 à 15 minutes

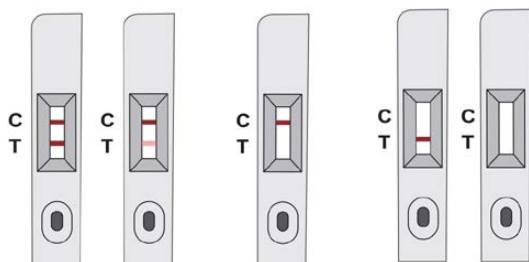

Positif

Négatif

Invalide

4 Lire le résultat



5 Mettre la cassette, l'écouvillon et le tube dans un sac avant de le jeter à la poubelle