


Extracteurs selon Thielepape

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- pour l'extraction de solides : les vapeurs passent directement dans le condenseur, le condensat s'écoule en continu à travers l'échantillon et retourne dans le flacon
- appareils complets constitués de :
 - **condenseur de Dimroth**, avec filetage GL 14
 - **tête d'extraction** avec robinet 2 voies et cartouches d'extraction, porosité 0
 - **flacon** à fond rond

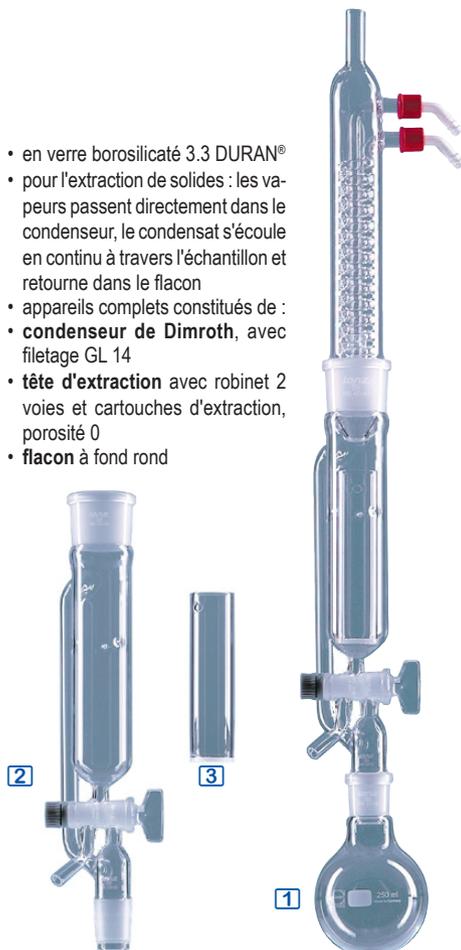

1 Extracteurs complets

extracteur	rodage condenseur	flacon	référence	Prix HT
30 ml	29/32	100 ml	EZ6301	
150 ml	45/40	250 ml	EZ6302	
250 ml	45/40	500 ml	EZ6303	

2 Têtes d'extraction

pour extracteur	rodage condenseur	référence	Prix HT
30 ml	29/32	EZ6304	
150 ml	45/40	EZ6305	
250 ml	45/40	EZ6306	

3 Inserts filtrants pour extracteur en verre, avec disque fritté, porosité 0

pour extracteur	référence	Prix HT
30 ml	EZ6307	
150 ml	EZ6308	
250 ml	EZ6309	

Extracteurs selon Knöfler-Böhm

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- le solvant est recyclé en continu : le condensat passe à travers l'échantillon d'extraction et retourne dans le ballon en continu, sans interrompre le processus d'extraction
- appareils complets constitués de :
 - **condenseur de Dimroth**, avec filetage GL 14
 - **tête d'extraction** gainée
 - **flacon** à fond rond



1 Extracteurs complets


extracteur	rodage condenseur	flacon	référence	Prix HT
30 ml	29/32	100 ml	EZ6311	
150 ml	45/40	250 ml	EZ6312	
250 ml	45/40	500 ml	EZ6313	
500 ml	60/46	1000 ml	EZ6314	

2 Têtes d'extraction gainées modèles conformes à la norme DIN 12604

pour extracteur	rodage condenseur	norme	référence	Prix HT
30 ml	29/32	-	EZ6315	
150 ml	45/40	-	EZ6316	
250 ml	45/40	DIN 12604	EZ6317	
500 ml	60/46	DIN 12604	EZ6318	

Extracteurs selon Twisselmann

- en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- appareils complets constitués de :
 - **condenseur de Twisselmann** amélioré, avec filetage GL 14
 - **tête d'extraction** avec enveloppe sous vide
 - **flacon** à fond rond

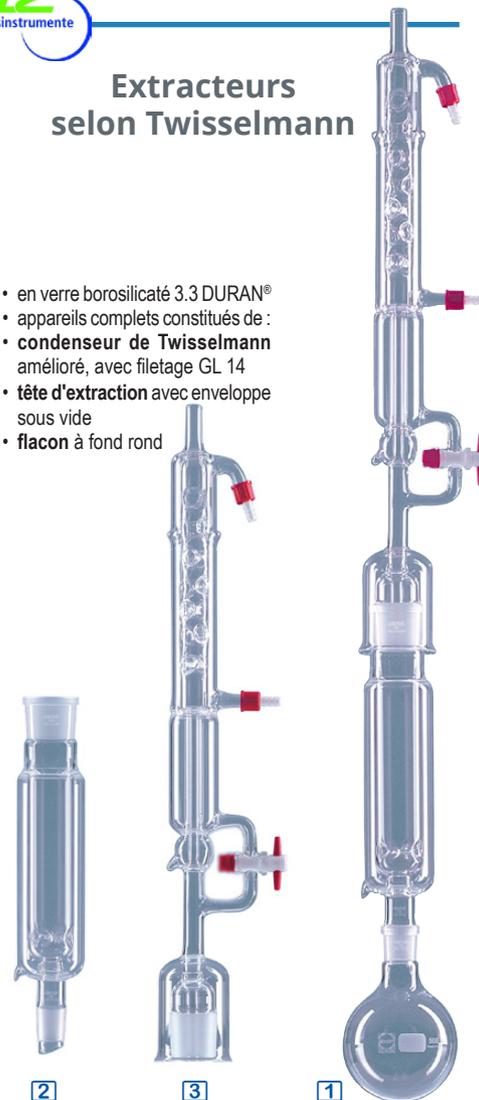

1 Extracteurs complets

extracteur	rodage condenseur	flacon	référence	Prix HT
30 ml	29/32	100 ml	EZ6321	
70 ml	34/35	100 ml	EZ6322	
100 ml	45/40	250 ml	EZ6323	
150 ml	45/40	250 ml	EZ6324	

2 Têtes d'extraction

pour extracteur	rodage condenseur	référence	Prix HT
30 ml	29/32	EZ6325	
70 ml	34/35	EZ6326	
100 ml	45/40	EZ6327	
150 ml	45/40	EZ6328	

3 Condenseurs avec receveur

pour extracteur	rodage	référence	Prix HT
30 ml	29/32	EZ6391	
70 ml	34/35	EZ6392	
100 - 150 ml	45/40	EZ6393	