


Micropipettes multicanaux à espacement variable Move It®

- ▶ pipetage synchrone de séries d'échantillons entre différents formats de récipients, comme entre tubes et plaques
- ▶ Research® plus Move It® : pipettes mécaniques entièrement autoclavables
- ▶ Xplorer® plus Move It® : pipettes électroniques, partie basse autoclavable
- ▶ tête rotative 360°

Pipettes mécaniques Research® plus Move It®



Pipettes électroniques Xplorer® plus Move It®

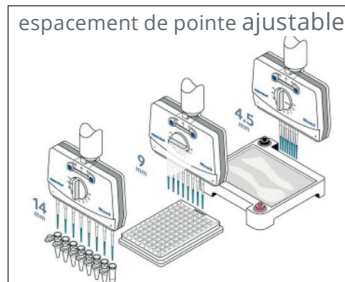

- pour les microplaques, les tubes et les gels d'agarose, l'espacement des pointes peut être librement ajusté entre 4,5 et 33 mm selon le modèle
- le format source et le format de destination sont ajustés manuellement et verrouillés, pour passer rapidement d'un format à l'autre
- absence du tube interne de connexion entre l'embout porte-cône et le système piston/cylindre : évite les problèmes de porosité et de fuites, augmente la précision et la durabilité
- tête de pipette rotative à 360° : lisibilité confortable de l'écran
- pipette équilibrée et ergonomique : bonne visibilité des pointes et des échantillons, sans effort physique
- modèles mécaniques entièrement autoclavables, modèles électroniques autoclavables en partie basse
- guide de sélection pour choisir la pipette adaptée selon les formats source et de destination
- les modèles électroniques nécessitent moins de force, améliorent la précision et la reproductibilité et peuvent être mis à jour grâce au logiciel Eppendorf Pipette Software Update Tool

capacité	distance inter-pointes		Pipettes mécaniques Research® plus Move It®	Pipettes électroniques Xplorer® plus Move It®
micropipettes 4 canaux à volume variable				
30 à 300 µl *	9 à 33 mm	●	DP1000	DP1010
120 à 1200 µl	9 à 33 mm	●	DP1001	DP1011
micropipettes 6 canaux à volume variable				
30 à 300 µl *	9 à 20 mm	●	DP1002	DP1012
120 à 1200 µl	9 à 20 mm	●	DP1003	DP1013
micropipettes 8 canaux à volume variable				
1 à 20 µl *	4,5 à 14 mm	●	DP1004	DP1014
5 à 100 µl *	4,5 à 14 mm	●	DP1005	DP1015
30 à 300 µl *	9 à 14 mm	●	DP1006	DP1016
120 à 1200 µl	9 à 14 mm	●	DP1007	DP1017
micropipettes 12 canaux à volume variable				
1 à 20 µl *	4,5 à 9 mm	●	DP1008	DP1018
5 à 100 µl *	4,5 à 9 mm	●	DP1009	DP1019

* micropipette livrée avec une boîte de pointes de epT.I.P.S®