


Micropipettes Proline® Plus
entièrement autoclavables

- micropipettes entièrement autoclavables sans démontage pour stérilisation à la vapeur à 121°C
- faible force nécessaire au pipetage : 15 N (modèle 1 canal, 1000 µl)
- nouvelle forme ergonomique de la poignée et de l'arceau
- légères : 82 g
- grand écran frontal pour l'affichage du volume : réglage et lecture faciles, convient pour droitiers ou gauchers
- **filtres SafeCone** : chaque pipette incorpore un filtre de protection qui empêche les aérosols ou les liquides d'atteindre les composants internes de la pipette (sauf modèles 2,5 µl et 10 µl), filtres de rechange en option, sur demande
- **système OptiLoad** sur micropipettes multicanaux : les embouts chargés de recevoir le cône sont montés sur ressort, ce mécanisme facilite la mise en place du cône, assure une étanchéité uniforme et facilite l'éjection
- **micropipettes livrées complètes** avec certificat individuel et clé d'étalonnage

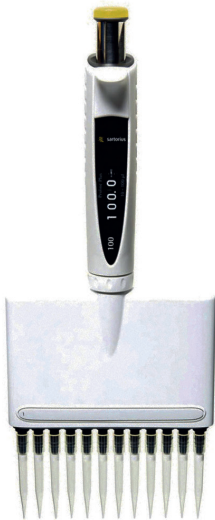

volume	incréments	exactitude (au volume min / max)	reproductibilité	filtre	référence	Prix HT
micropipettes monocal à volume variable						
0,1 à 3 µl	0,002 µl	±10% ⁽¹⁾ / ±1,3%	±6,0% ⁽¹⁾ / ±0,80%	-	PS1001	
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±2,5% ⁽²⁾ / ±1,0%	±1,5% ⁽²⁾ / ±0,60%	-	PS1002	
2,0 à 20 µl	0,02 µl	±3,0% / ±0,9%	±2,0% / ±0,40%	A	PS1003	
5,0 à 50 µl	0,10 µl	±3,0% / ±1,0%	±1,5% / ±0,30%	B	PS1004	
10 à 100 µl	0,10 µl	±2,0% / ±0,8%	±1,0% / ±0,15%	B	PS1005	
20 à 200 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,6%	±0,8% / ±0,15%	C	PS1006	
100 à 1000 µl	1,00 µl	±1,0% / ±0,6%	±0,4% / ±0,20%	D	PS1007	
500 à 5000 µl	10,0 µl	±2,0% / ±0,5%	±0,6% / ±0,20%	E	PS1008	
1000 à µl	20,0 µl	±3,0% / ±0,6%	±0,6% / ±0,20%	E	PS1009	
micropipettes 8 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,00%	-	PS2001	
10 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% / ±0,70%	±1,5% / ±0,25%	B	PS2002	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	C	PS2003	
micropipettes 12 canaux à volume variable						
0,5 à 10 µl	0,01 µl	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,50%	±4,0% ⁽²⁾ / ±1,00%	-	PS3001	
10 à 100 µl	0,10 µl	±3,0% / ±0,70%	±1,5% / ±0,25%	B	PS3002	
30 à 300 µl	0,20 µl	±2,0% / ±0,60%	±1,0% / ±0,25%	C	PS3003	
accessoires						
portoir pour une pipette				1	PS9101	
portique				2	PS9110	
portoir carrousel pour 6 pipettes				3	PS9106	

⁽¹⁾ Exactitude / reprod. pour volume 0,3 µl. ⁽²⁾ Exactitude / reprod. volume 1 µl.

Filtres en polyéthylène

- empêchent l'entrée de liquides et vapeurs dans les composants internes de la micropipette
- filtres Plus : protection supérieure pour travaux tels que radioactivité, culture cellulaire, bactériologie, virologie, etc.

filtres	Ø mm	filtres Standard (les 50)	filtres Plus (les 50)
A	Ø 1,83 mm	PS9400	-
B	Ø 2,51 mm	PS9401	PS9405
C	Ø 3,15 mm	PS9402	PS9406
D	Ø 5,33 mm	PS9403	PS9407
E	Ø 6,73 mm	PS9404	PS9408