


## Réfrigérateurs scientifiques 125 à 600 litres certifiables COFRAC

-  **ATEX int./ext.**
-  **+2 à +20°C**
- certifiables COFRAC**
-  **froid ventilé**

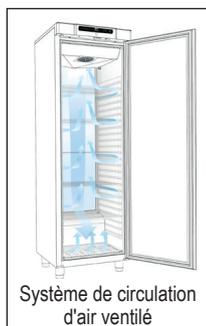

### Caractéristiques générales

- **certification COFRAC** : ces appareils peuvent recevoir un certificat d'étalonnage COFRAC (nous contacter)
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- report des alarmes sur un contact sec
- sécurités : alarme de porte et alarme de température sonores et visuelles programmables
- historique alarme température
- système frigorifique basé sur un évaporateur tubes/ailettes
- température constante et homogène
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte

- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- fonction Smart defrost intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats

### Construction

- intérieur plastique ABS et inox / extérieur laqué blanc
- isolation 50 mm de polyuréthane expansé (60 mm pour modèle 583 litres)
- porte pleine isolée, ou porte vitrée avec éclairage LED, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- fluide réfrigérant écologique R600a
- réfrigérateurs montés sur pieds, ou sur roulettes
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles supplémentaires et plateaux en option, tiroirs et paniers sur demande



Régulateur électronique

capacité brute	125 litres	218 litres	346 litres	583 litres
capacité utile	104 litres	189 litres	312 litres	419 litres
précision	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C
nombre de grilles livrés / max.	4 / 7 grilles	5 / 14 grilles	6 / 25 grilles	5 / 24 grilles
nombre de plateaux livrés / max.	0 / 4 plateaux	0 / 7 plateaux	0 / 13 plateaux	0 / 12 plateaux
nombre de paniers livrés / max.	0 / 2 paniers	0 / 4 paniers	0 / 7 paniers	0 / 0 paniers
dim. ext.(lxpxh)	595 x 640 x h830 mm	595 x 640 x h1220 mm	595 x 640 x h1885 mm	695 x 868 x h1984 mm
poids	46 kg	55 kg	78 kg	114 kg
consommation	0,61 kWh/24 h	0,63 kWh/24 h	0,73 kWh/24 h	1,15 kWh/24 h
cond. amb. admissibles porte pleine/vitrée	+10 à +35°C / +10 à +32°C	+10 à +35°C / +10 à +32°C	+10 à +35°C / +10 à +32°C	+10 à +43°C / +10 à +38°C
pieds / roues	2 pieds / 2 roulettes	2 pieds / 2 roulettes	4 roues dont 2 à 360° avec frein	4 roues dont 2 à 360° avec frein
Réfrigérateurs porte pleine	GM1810 [1]	GM1820	GM1830 [4]	GM1840 [6]
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1815 [2]	GM1825 [3]	GM1835 [5]	GM1845
accessoires				
grilles acier plastifié	GM1801	GM1802	GM1803	GM1804
grilles inox	GM1805	GM1806	GM1807	GM1808
plateaux perforés inox	GM1809	GM1811	GM1812	GM1813