


Réfrigérateurs de laboratoire ATEX - 400 et 600 litres

Ex ATEX int./ext.

+2 à +20°C

froid ventilé

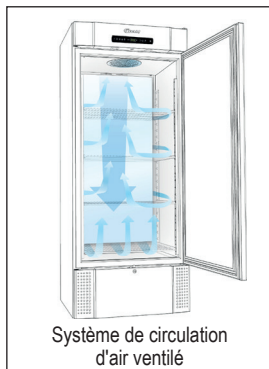

Caractéristiques générales


- température constante et homogène
- régulateur électronique avec boutons à effleurement, affichage digital
- temps de retour à la température de consigne très court après ouverture de porte
- alarmes programmable : atteinte des seuils mini / maxi de température, alarme de porte sonore et visuelle
- température ambiante admissible +10°C à +43°C portes pleines, +10°C à +38°C portes vitrées
- report des alarmes sur un contact sec
- enregistreur de température à disque en option
- historique alarme température
- fonction "Smart defrost" intelligente : utilisation d'un minimum de temps et d'énergie pour le dégivrage, évaporation automatique des condensats
- sonde additionnelle placée dans l'espace de stockage pour affichage de la température et alarmes
- conformes BPL

Construction

- 2 versions :
 - intérieur aluminium, fond et intérieur de porte inox, extérieur laqué blanc
 - tout inox intérieur et extérieur
- isolation 60 mm de polyuréthane expansé
- rappel de porte automatique
- passage de sonde Ø 24,5 mm
- porte pleine isolée, ou porte vitrée avec éclairage LED, charnières à droite (à gauche sur demande)
- fermeture à clé
- fluide réfrigérant écologique R290
- système frigorifique placé en-dessous de la chambre
- base avec roues blocantes encastrées
- grilles en fil d'acier plastifié réglables sur toute la hauteur, grilles suppl. et plateaux en option, tiroirs sur demande



↑
compresseur à la base
du congélateur

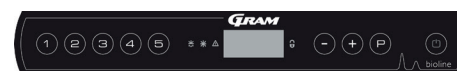

Régulateur électronique

capacité brute	425 litres	625 litres
capacité utile	303 litres	451 litres
précision	±3°C à +5°C	±3°C à +5°C
plateaux livrés / max.	5 / 25 plateaux	5 / 25 plateaux
tiroirs livrés / max.	0 / 12 tiroirs	0 / 12 tiroirs
dim. ext.(lxpxh)	600 x 731 x h2000 mm	815 x 731 x h2000 mm
poids	112 kg	152 kg
consommation	1,27 kWh/24 h	1,30 kWh/24 h
▼ réfrigérateurs intérieur alu-inox* / extérieur laqué blanc		
Réfrigérateurs porte pleine	GM1710 1	GM1720 2
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1711	GM1721
▼ réfrigérateurs intérieur inox / extérieur inox		
Réfrigérateurs porte pleine	GM1714	GM1724 3
Réfrigérateurs porte vitrée	GM1715	GM1725 4
accessoires		
grilles acier plastifié	GM1701	GM1702
grilles inox	GM1703	GM1704
plateaux perforés inox	GM1705	GM1706
enregistreur de température	GM1707	GM1708