

Armoire de sécurité basse 1 porte EN14470-1 - 90 minutes pour batteries lithium-ion

- ▶ certifiées EN14470-1 / 90 minutes
- ▶ certifiées EN16121

Construction et équipements intérieurs

- double paroi en acier électro-galvanisé épaisseur 10 à 15 mm, peinture époxy résistante aux acides
- séparation des parois par panneaux en sulfate de calcium et laine de roche
- intérieur de l'armoire recouvert de mélamine, haute résistance aux vapeurs chimiques et agressives
- fermeture automatique des portes en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C
- joints thermo-dilatants 30 mm en cas d'incendie : permettent d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- clapets d'aération coupe-feu pour l'extraction des vapeurs lourdes, fermeture automatique au-dessus de +70°C
- charnières anti-étincelles
- vérins de mise à niveau
- dispositif pour la mise à la terre
- étiquettes de signalisation et de sécurité
- fermeture à clé
- sortie de ventilation Ø 100 mm à l'arrière de l'armoire
- corps gris anthracite RAL 7035, portes **bleu** RAL 5010
- lot de 4 roulettes pour armoire 1 porte en accessoire
- lot de 6 roulettes pour armoire 2 portes en accessoire
- armoires livrées avec 1 caillebotis et 1 bac de rétention



Module de ventilation en option

- **SC3031**, livré avec câble d'alimentation et boîte à filtre, sortie Ø 125 mm
- **SC3032**, affichage en temps réel du flux d'air et du débit, livré avec câble d'alimentation et boîte à filtre, sortie Ø 125 mm
- **SC3034**, comprend 1 mètre de gaine flexible Ø 100 mm et 2 colliers de serrage
- **SC3035**, comprend 1 mètre de gaine flexible Ø 125 mm et 2 colliers de serrage

Extincteur automatique

- placé à l'intérieur de l'armoire
- déclenchement automatique au-dessus de +72°C à l'intérieur de l'armoire


Prises électriques

- sortie en monophasé 230 V
- rack de 6 prises pour armoire 1 porte



Systèmes d'alarme

- **SC3002**, extincteur automatique inclus. Alarme visuelle et sonore dès détection d'un incendie par le capteur de fumée et de température intégrés. Configuration de sirènes, délai d'arrêt d'extinction et temps de décharge grâce à un panneau de commande situé sur l'un des côtés de l'armoire. Connexion possible sur SSI (Système de Sécurité Incendie).
- **SC3003**, alerte par SMS, emails et appels en cas de détection d'incendie par le capteur de fumée et de température.
- **SC3004**, dispositif GSM/GPRS. Alerte par appel téléphonique en cas de détection d'une haute température. à l'intérieur de l'armoire. Possibilité de mémoriser jusqu'à 1.000 numéros de téléphone. Écran LCD tactile de 2,8 pouces. Connexion à internet possible. Surveillance automatique en permanence de l'état de l'appareil. Redémarrage automatiquement en cas de défaillance sans intervention extérieure. 6 entrées programmables.

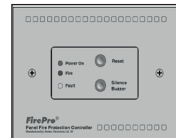

Largeur	Armoire 600 mm	
portes	1 porte ouverture à gauche	1 porte ouverture à droite
dimensions externes (lxpxh)	595 x 520 x h720 mm	595 x 520 x h720 mm
dimensions intérieures (lxpxh)	483 x 349 x h593 mm	483 x 349 x h593 mm
pois	75 kg	75 kg
Armoire de sécurité	SC3100	SC3200
accessoires		
extincteur automatique avec détecteur de température	SC3001	SC3001
alarme avec détecteur de température, extincteur compris	SC3002	SC3002
alarme avec détecteur de fumée - alerte par SMS, emails et appels	SC3003	SC3003
étagères supplémentaires	SC3011	SC3011
dispositif GSM/GPRS	SC3004	SC3004
socles	SC3012	SC3012
lot de 4 roulettes (dont 2 autobloquantes)	SC3013	SC3013
rack de prises électriques avec disjoncteur différentiel + thermique 16 A	SC3014	SC3014
rack de prises électriques avec interrupteur magnétothermique 16 A	SC3015	SC3015
ventilation		
caisson de ventilation rejet extérieur	SC3031	SC3031
caisson de ventilation rejet extérieur avec panneau contrôle digital	SC3032	SC3032
raccordement pour caisson de ventilation (obligatoire pour SC3031)	SC3033	SC3033
kit de raccordement pour raccorder l'armoire au caisson	SC3034	SC3034
kit de raccordement pour extraction du caisson vers l'extérieur	SC3035	SC3035