

Écouvillons floqués en tubes avec milieu de culture

certification écouvillons DM 93/42/CE

certification tubes + milieu CE IVD 98/79

- compatibles avec les techniques de diagnostic moléculaire et le prolongement direct sur lame de verre

Milieu AMIES

- pour les échantillons microbiologiques
- maintient la viabilité des bactéries aérobies, anaérobies et anaérobies facultatives jusqu'à 48 heures, et jusqu'à 24 heures pour les bactéries plus sensibles
- traitement traditionnel ou automatisé des échantillons

Milieu CARY BLAIR

- modification du milieu Stuart
- conçu, à l'origine, pour les prélèvements des selles
- remplacement du glycérophosphate par un tampon inorganique phosphaté, suppression du bleu de méthylène, augmentation du pH à 8,4


Milieu VICUM®

- pour les échantillons microbiologiques qui contiennent des virus, Chlamydia, Ureaplasma et / ou Mycoplasma
- contient des antibiotiques qui inhibent la croissance des bactéries et des champignons
- maintient la capacité d'infection des virus jusqu'à 96 heures
- chaque tube contient des billes de verre pour faciliter la lyse des cellules, l'homogénéité de l'échantillon et maximiser l'élution de l'échantillon de l'écouvillon dans le milieu
- compatible avec les techniques de diagnostic moléculaire par PCR quantitative

Milieu VIRUS

- pour les échantillons microbiologiques contenant des virus
- contient des antibiotiques qui inhibent la croissance des bactéries et des champignons
- maintient la capacité d'infection des virus jusqu'à 96 heures
- compatible avec les techniques de diagnostic moléculaire par PCR quantitative

tubes coniques avec jupe et étiquette


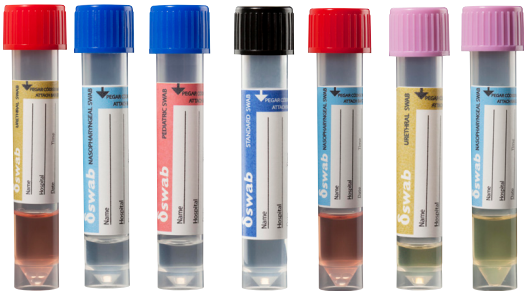


écouvillons secs avec tête en polyester et tige en polystyrène sécable à 80 ou 100 mm

type	extrémité	application
A	polyester standard	nez, gorge, vagin, blessures, rectum, fèces
B	polyester étroit	œil, oreille, gorge, nez, urogénital
C	polyester très étroit	nasopharynx
D	polyester étroit et court	pédiatrie

Kit en sachet individuel stérile flow-pack contenant un tube avec milieu et un écouvillon sécable.

Point de cassure à 80 ou 100 mm, suivant modèle

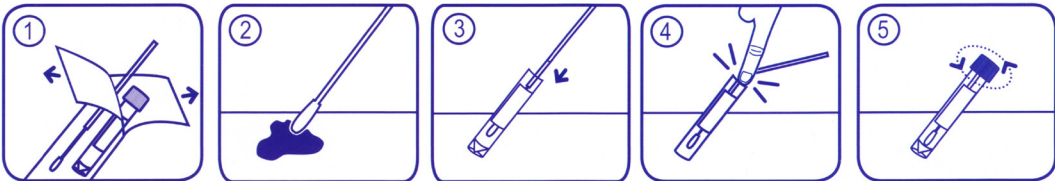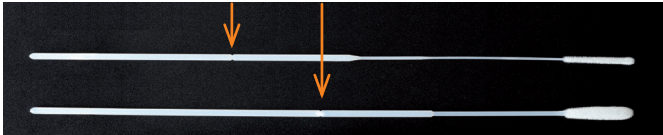

milieu de culture	capuchon	tube	dim. tube (Ø x h)	écouvillon		point de cassure	référence	Prix HT
				type	extrémité			
AMIES	Bleu	1 ml	13 x 82,6 mm	A	polyester floqué standard	80 mm	AX304221F*	les 100
				B	polyester floqué étroit	80 mm	AX304222KF*	les 100
				C	polyester floqué très étroit	80 mm	AX304223KF*	les 100
				D	polyester floqué étroit et court	100 mm	AX304225F*	les 100
CARY BLAIR	Noir	2 ml	13 x 82,6 mm	A	polyester floqué standard	80 mm	AX304226KF*	les 100
				A	polyester floqué standard	80 mm	AX304238F	les 90
				B	polyester floqué étroit	80 mm	AX304236K	les 90
VICUM®	Rouge	2 ml	13 x 82,6 mm	C	polyester floqué très étroit	80 mm	AX304234KF	les 90
						100 mm	AX304230	les 90
				D	polyester floqué étroit et court	80 mm	AX304239KF	les 90
						100 mm	AX304239	les 90
SPÉCIAL VIRUS	Rose	3 ml	13 x 82,6 mm	A	polyester floqué standard	80 mm	AX304243F	les 100
				B	polyester floqué étroit	100 mm	AX304305DF	les 100
				C	polyester floqué étroit et court	80 mm	AX304305F	les 100
SPÉCIAL VIRUS DÉSACTIVÉ	Rose	3 ml	13 x 82,6 mm	A	polyester floqué étroit et court	80 mm	AX304305FI	les 100
				C	polyester floqué standard	80 mm	AX304243KFI	les 100

*COMPATIBLE AVEC L'AUTOMATE WASP® (BIOMÉRIEUX)