




Armoires de sécurité EN14470-1 - 90 minutes pour produits inflammables

- ▶ certifiées EN14470-1 / 90 minutes
- ▶ étagères grande surface
- ▶ hauteur réduite à 1950 mm pour faciliter le passage des portes

SkateMover

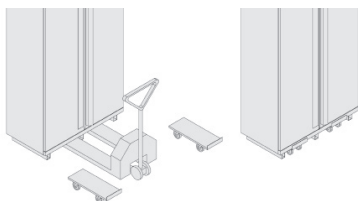

- l'armoire posée sur 2 SkateMover (à l'aide d'un transpalette) est facilement déplacée
- déplacement sur 360° autour d'un axe vertical
- **important** : option "socle amovible" obligatoire pour l'utilisation des SkateMover



Construction

- double paroi en acier électro-galvanisé épaisseur 10 mm, peinture époxy
- séparation des parois par isolant ignifugé résistant à +800°C : soumis à une température élevée, l'isolant libère des fines gouttelettes d'eau qui refroidissent l'intérieur de l'armoire
- intérieur de l'armoire recouvert de peinture époxy résistante aux acides
- fermeture automatique des portes en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C grâce à un thermofusible
- joints spéciaux à effet dilatatant en cas d'incendie : permet d'isoler parfaitement l'intérieur de l'armoire
- gonds de porte anti-étincelles
- 3 étagères et 1 bac de rétention avec caillebotis en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- dispositif pour la mise à la terre
- étiquette de signalisation et de sécurité
- 1 serrure avec 1 clé par porte
- 2 clapets d'aération automatiques : 1 sur le toit et 1 au bas de l'armoire permettent l'extraction des vapeurs lourdes, fermeture automatique au-dessus de +70°C
- sortie ventilation Ø 100 mm sur le dessus de l'armoire
- couleur grise (jaune sur demande)
- armoires livrées avec 3 étagères, bac de rétention et caillebotis

Armoires de sécurité 90 minutes à portes libres



- **mécanisme portes libres** : comme une porte standard, l'opérateur ouvre et ferme la porte à sa convenance, la porte reste dans la position dans laquelle l'opérateur l'a placée, et peut rester ouverte si nécessaire
- en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C, un fusible thermique enclenche le dispositif de fermeture des portes (conformité norme EN14470-1)
- portes à poignées en acier chromé, une serrure par porte

Armoires de sécurité 90 minutes à fermeture systématique des portes



- **mécanisme de porte à fermeture systématique** : quand l'opérateur lâche la poignée, la porte se ferme toute seule; si l'opérateur veut laisser la porte ouverte, il doit l'ouvrir jusqu'à 110° environ, un dispositif de blocage conserve cette position
- en cas d'élévation de la température au-dessus de +50°C, un fusible thermique débloque la porte et enclenche le dispositif de fermeture des portes (conformité norme EN14470-1)
- poignée filante sur toute la hauteur de la porte, une serrure par porte



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Étagères



- **étagères standard** : en acier recouvert de peinture époxy, position réglable
- **étagères inox** : en acier inoxydable
- **étagères rotatives** : en acier recouvert de peinture époxy, idéal pour faciliter la saisie des récipients, dimensions Ø 390 mm (axe central Ø 30 mm), hauteur 30 mm, rétention 3,5 litres, charge maximale 30 kg, position réglable, hauteur minimum entre 2 étagères 100 mm

Extincteur automatique

- placé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'armoire
- déclenchement automatique au-dessus de +68°C à l'intérieur de l'armoire



Socle à plinthe amovible

- socle sous l'armoire avec plinthes frontale et latérales amovibles
- facilite la manutention de l'armoire avec un transpalette (attention : hauteur augmentée de 100 mm)
- à commander avec l'armoire



Alarme de température

- alarme visuelle, sonore et téléphonique, thermostat digital équipé d'une sonde de température placée dans l'enceinte de l'armoire
- en cas de dépassement de la température de consigne, enclenchement de l'alarme visuelle et sonore sur l'armoire et appel d'un des 24 numéros de téléphone pré-enregistrés dans le système
- gamme : -40 à +90°C ± 1°C, résolution 1°C



Ventilation - filtration



5



6



7

- **LMD492 - ventilation** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, prédisposition pour installation d'un filtre (filtre en option) dim. caisson 260 x p430 x h270 mm (gaine en option)
- **LMD483 - ventilation ATEX (anti-explosion)** : permet, l'extraction des vapeurs vers l'extérieur du bâtiment, capacité d'aspiration 200 m³/h, dim. : 260 x p430 x h270 mm

- **LMD491 - ventilation-filtration à recyclage d'air filtré, sans extraction vers l'extérieur** : les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg). Module livré sans filtre, à compléter par un filtre au charbon actif en option, au choix : pour acides, acides/solvants ou pour solvants dim. module : 550 x p500 x h200 mm
- **LMD498 - ventilation-filtration à recyclage d'air filtré, sans extraction vers l'extérieur, avec alarme conforme norme NF X15211** : les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif (7 kg). Module livré sans filtre, à compléter par un filtre au charbon actif en option, au choix : pour acides, acides/solvants ou pour solvants dim. module : 550 x p500 x h200 mm

Armoires EN14470-1 - 90 minutes	armoires 1 porte*	armoires 2 portes
armoires complètes avec 3 étagères	largeur 600 mm	largeur 1200 mm
dimensions internes utiles (lxpxh)	496 x 446 x h1640 mm	1090 x 446 x h1640 mm
nombre d'étagères livrées / max.	3 / 4 étagères	3 / 4 étagères
étagère : capacité de rétention / charge max.	7 litres / 80 kg	16 litres / 80 kg
dimensions étagères (lxpxh)	496 x 420 x h39 mm	1094 x 420 x h39 mm
dimensions externes (lxpxh)	595 x 600 x h1950 mm	1200 x 600 x h1950 mm
poids	230 kg	390 kg
Armoires à portes libres, complètes	LMD710 1	LMD730 2
Armoires à fermeture systématique des portes, complètes	LMD300 3	LMD850 4
ventilation rejet extérieur sans filtre		
module de ventilation standard sans filtre, rejet extérieur	LMD492 5	LMD492 5
module de ventilation ATEX sans filtre, rejet extérieur	LMD483	LMD483
filtre pour LMD492 et LMD483	LMD382	LMD382
gaine souple pour rejet extérieur Ø 100 mm, le mètre	EC2063	EC2063
ventilation-filtration à recyclage d'air filtré		
module ventilation-filtration sans filtre, sans alarme	LMD491 6	LMD491 6
module ventilation-filtration NF X15211 sans filtre, avec alarme	LMD498 7	LMD498 7
filtre pour acides	LMD902	LMD902
filtre pour acides / solvants	LMD903	LMD903
filtre pour solvants	LMD904	LMD904
préfiltre anti-poussière	LMD901	LMD901
étagères		
étagère supplémentaire en acier peint	CCF1203	LMD813
étagère en acier inoxydable	CCF1561	LMD814
étagère rotative en acier peint	LMD362	-
options et accessoires		
socle amovible	LMD906	LMD907
SkateMover, la paire	LMD450	LMD450
extincteur automatique	LMD391	LMD391
alarme de température	LMD385	LMD385
système de refroidissement	LMD386	LMD386

* Ouverture à droite. Nous consulter pour ouverture à gauche