



Armoires de sécurité portes battantes certifiées EN14470-1 pour produits inflammables

- certifiées EN14470-1 / 90 min
- fermeture systématique ou temporisée
- étagères fixes

Caractéristiques générales

- armoires de sécurité certifiées norme EN14470-1 : résistance au feu 90 minutes
- construction en "sandwich" : parois externes en tôle d'acier, cloisons internes en plâtre et bois, parois intérieures et tiroirs en tôle d'acier
- coloris au choix : **jaune** (ajouter la lettre "J" à la fin de la référence) ou **gris** (ajouter la lettre "G")
- joints intumescents : se dilatent en cas d'élévation de la température, assurent une parfaite isolation de l'intérieur de l'armoire
- gonds de porte anti-étincelles
- signalisation sur la face externe de la porte
- serrure de porte livrée avec une clé
- pieds réglables en hauteur
- ventilation et filtration en option



1

2

Équipement intérieur

- étagères fixes en acier revêtement époxy, en forme de bac de rétention, charge max. : 75 kg / étagère : 2 étagères pour les armoires "mi-hauteur", 3 pour hauteurs standard
- 1 bac de rétention avec caillebotis : évite que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées



3

4

Portes à fermeture temporisée

- fermeture des portes enclenchée automatiquement 60 s. après l'ouverture
- aérations équipées d'un thermofusible déclenchant la fermeture forcée automatique des portes, quelle que soit la position initiale, en moins de 20 s., si la température ambiante dépasse +50°C
- armoires à 2 portes : **ouverture assistée des 2 portes simultanément d'une seule main**; l'ouverture d'une porte entraîne l'ouverture de l'autre grâce à un système d'entraînement couplé asynchrone avec guidage coulissant

Portes à fermeture systématique


- fermeture des portes, dès que l'utilisateur lâche la poignée, possibilité de bloquer la porte en position ouverte
- aérations équipées d'un thermofusible déclenchant la fermeture forcée automatique des portes, quelle que soit la position initiale, en moins de 20 s., si la température ambiante dépasse +50°C

Livraison et installation

- **livraison standard**, rez-de-chaussée ou quai de déchargement, en France métropolitaine hors Corse, **incluse dans le prix de l'armoire**
- **livraison et installation** : sur demande

Armoires portes battantes	armoires 1 porte - largeur 600 mm		armoire 2 portes - 900 mm		armoires 2 portes - largeur 1200 mm	
	"mi-hauteur"	hauteur standard	hauteur standard	hauteur standard	"mi-hauteur"	hauteur standard
dim. externes (lpxh mm)	600 x 615 x h1298 mm	600 x 615 x h1970 mm	900 x 615 x h1970 mm	1200 x 615 x h1298 mm	1200 x 615 x h1970 mm	1200 x 615 x h1970 mm
dim. internes (lpxh mm)	450 x 524 x h1072 mm	450 x 524 x h1742 mm	750 x 524 x h1742 mm	1050 x 524 x h1072 mm	1050 x 524 x h1742 mm	1050 x 524 x h1742 mm
poids armoires systématique / temporisée	260 kg	290 kg	340 kg	420 kg	450 kg	450 kg
étagère dim. (lpxh)	345 x 505 x h50 mm	345 x 505 x h50 mm	565 x 510 x h90 mm	865 x 510 x h90 mm	865 x 510 x h90 mm	865 x 510 x h90 mm
bac de rétention, capacité	22 litres	22 litres	28 litres	33 litres	33 litres	33 litres
Armoires portes systématiques	EX9014 1	EX9001 3	EX9026	EX9024 2	EX9017 4	
Armoires portes temporisées	EX9015	-	-	EX9025	-	-

Ventilation et filtration

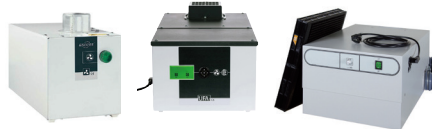

1

2

3

- ventilation 120 v/h, extraction des vapeurs vers l'extérieur du local, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres, dim. module 200 x 400 x h200 mm :
EX8436 - ventilation standard
EX8433 - ventilation avec alarme visuelle en cas de dysfonctionnement 1
- EX8992 2 - ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4), avec contrôle de l'évacuation d'air et alarme sonore et visuelle, conforme EN 14470-1 et DIN 12925-1 : boîtier en acier revêtu époxy, silencieux (23 dB), les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques et rejetées dans le local, dim. module : 256 x p555 x h308 mm / 14 kg

- EX8980, EX8981 3 - ventilation à recyclage d'air filtré conforme à la norme NFX15211 avec ou sans extraction vers l'extérieur : les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques ou vapeurs acides. Un raccord de ventilation DN 75 (Ø 75 mm) permet le rejet à l'extérieur (prévoir 1 gaine d'évacuation) dim. module : 410 x p430 x h300 mm
- ventilation surpuissante pour plusieurs armoires simultanément (standard ou ATEX) : sur demande

référence	Prix HT
1 ventilation standard	
EX8436 Ventilation standard, ATEX	
EX8433 Ventilation avec alarme, ATEX	
2 ventilation / filtration ATEX CE II G T4	
EX8992 Ventilation / filtration ATEX avec filtre AS pour solvants organiques	
3 ventilation à recyclage d'air filtré NFX15211	
EX8980 Ventilation / filtration avec filtre AS pour solvants organiques	
EX8981 Ventilation / filtration avec filtre BE pour vapeurs acides	