



# ARMOIRES DE SÉCURITÉ

## Armoires résistance au feu 90 min portes pliables

EN90 - certifiées EN14470-1 / 90 min

- ▶ stockage de substances inflammables et dangereuses
- ▶ aménagement intérieur avec tiroirs coulissants ou étagères

- construction à double paroi en acier verni recouvert d'une peinture époxy résistante, antidérapante et anticorrosion
- **construction** : rigidité maximale en torsion
- serrure anti effraction avec témoin (rouge / vert)
- étagère réglable en hauteur (pas 32 mm), charge max. admissible par étagère : 75 kg, raccord de ventilation Ø75 mm sur le toit de l'armoire pour ventilateur externe
- **portes pliantes** : gain de place, maintien de la porte en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **configurations au choix** :
  - 3 étagères acier en forme de bac de rétention, 1 bac de rétention et 1 caillebotis, charge max. 75 kg / étagère
  - 4 tiroirs en acier
  - 6 tiroirs en acier
- **tiroirs coulissants** en forme de bac de rétention, à **fermeture systématique**, tiroir pour charges lourdes en inox ou en acier recouvert époxy sur demande
- **bac de rétention** capacité 33 litres avec **caillebotis**, pour éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées
- **aménagements individuels en option** : nombreuses possibilité d'aménagements individuels (étagères acier peint époxy, acier inox, tiroir acier peint époxy, acier inox, tiroir charges lourdes, bac de rétention en PP, etc.)
- **plinthe frontale amovible au bas de l'armoire** : pour transport et manipulations faciles, pour passage des fourches d'un transpalette, déplacement facile sans palette
- **SkateMover** : l'armoire posée sur 2 SkateMover (à l'aide d'un transpalette) est facilement déplacée et positionnée déplacement sur 360° autour d'un axe vertical

construction rigide en torsion


soCLE de transport et plinthe amovibles pour faciliter le transport et la manutention

châssis gris anthracite, façades de portes disponibles en 7 couleurs

4 pieds de mise à niveau



Signalétique compacte, simple et claire.

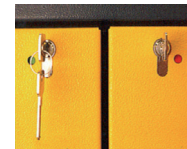

Serrure anti-effraction, fermeture centralisée, témoin couleur de fermeture (rouge / vert).

### Façades de portes disponibles en 2 couleurs

couleur	jaune	gris
code RAL	1004	7035
code	J	G

Ajoutez le code couleur à la suite de la référence de l'armoire

<b>largeur</b>	<b>1200 mm</b>
<b>portes</b>	<b>2 portes</b>
<b>dimensions externes (lxpxh) / poids</b>	1200 x 615 x h1955 mm / 424 kg
<b>dimensions internes (lxpxh)</b>	1050 x 520 x h1645 mm
<b>étagère dimensions (lxpxh) / charge max.</b>	865 x 510 x h90 mm / 75 kg
<b>tiroir dimensions (lxpxh) / charge max.</b>	865 x 500 x 50 mm / 60 kg
<b>configuration</b>	
3 étagères + bac de rétention + caillebotis	EQ2010 <b>[1]</b>
4 tiroirs	EQ2015
6 tiroirs	EQ2020
<b>accessoires</b>	
SkateMover, les deux	EQ9500
<b>ventilation / filtration</b>	
ventilation standard avec rejet vers l'extérieur, ATEX	EX8436
ventilation / filtration ATEX CE II G T4 avec filtre AS pour solvants organiques	EX8992
filtre de rechange	EX8992F

\* Ouverture porte : charnières de porte à droite, possibilité de charnières de porte à gauche (sur demande).