

Coffres de sécurité pour récupération des solvants, résistance au feu 90 minutes

- ▶ récupération des liquides organiques souillés
- ▶ certifiés EN14470-1 / 90 minutes pour produits inflammables

Conformité

- homologués normes EN14470-1 EN1363-1
- résistance au feu 90 minutes

Construction - Équipement


- double paroi : parois extérieures en acier 12/10^{ème} recouvert de peinture époxy blanche
- parois intérieures en mélaminé blanc
- panneaux d'isolation thermique entre les parois
- pictogrammes normalisés
- bac de rétention amovible au niveau bas
- points de fixation pour mise à terre

Sécurité

- sortie Ø100 mm pour raccordement éventuel, avec un système de ventilation
- ventilation - filtration forcée en option
- conduits de ventilation avec système thermofusible isolant le contenu en cas d'incendie
- maintien des portes en position ouverte avec fermeture automatique thermo-régulée à +50°C
- joints de porte thermolatants
- fermeture à clé

Récupération de déchets liquides

- orifice pour tuyau d'évacuation
- système intumescent pour l'isolation du contenu de l'armoire en cas d'incendie
- entonnoir en HDPE noir avec grille amovible
- jerrycan en HDPE blanc, capacité 12 litres
- capteur électronique de niveau, à fixer sur le jerrycan ou sur la paroi de l'armoire
- alarme sonore et visuelle à distance

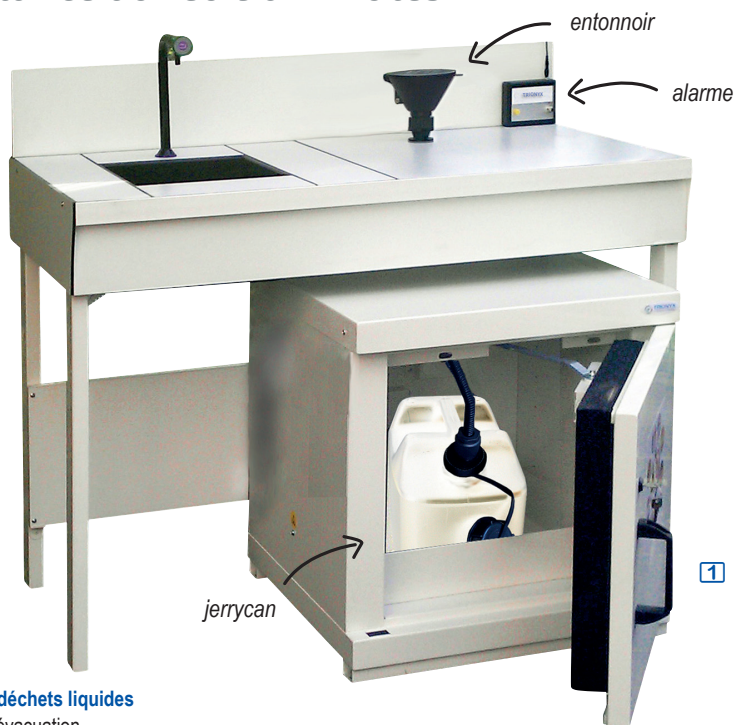

capacité de stockage	coffre 1 porte	coffre 2 portes
capacité	30 litres	60 litres
dim. externes (lxpxh)	635 x 570 x h 630 mm	1137 x 570 x h 630 mm
dim. internes (lxpxh)	490 x 285 x h 420 mm	1000 x 285 x h 420 mm
jerrycan en HDPE	12 litres	12 litres
poids	160 kg	230 kg
Coffres anti-feu récupération déchets	TX2060 [1]	TX2065

Systèmes de ventilation et filtration

Kit de raccordement :

- tous les caissons de ventilation sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :
1 gaine de 1 mètre,
1 colerette Ø 100 mm,
2 colliers de serrage
- reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur



Ventilation sans filtration, avec rejet vers l'extérieur

- modèle standard
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson



ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 Caisson standard, raccordement [2]

TX9170 Caisson ATEX CE II 3G, raccordement

Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

- modèle conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement et de vitesse de l'air de la norme NFX15211
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques"



ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local		référence	Prix HT
caisson norme NFX15211	[3] caisson, filtre, raccordement	TX9120	
caisson ATEX CE II 3G	[4] filtre de rechange	TX9125	
		TX9115	