



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires de sécurité multirisques 3 ou 4 compartiments

- conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68
du Code de la Santé Publique



1



2

Armoires de sécurité multirisques

- compartiments prévus par familles de produits dangereux conformément aux prescriptions de l'INRS et au Code de la Santé Publique
- conformes aux articles R.5132-66 et R.5132-68 du Code de la Santé Publique
- pictogrammes normalisés conformes aux normes et à la directive européenne

Ventilation

- raccord de sortie Ø 75 mm
- ventilation en option


Construction

- corps en tôle d'acier peint, châssis gris anthracite, portes blanches
- serrure dans la poignée avec clé
- installation facile : pieds réglables intégrés pour compenser les aspérités du sol
- ouvertures d'aération favorisant une ventilation naturelle

Équipements intérieurs

- 1 étagère en acier galvanisé, réglable en hauteur, charge max. 50 kg, 1 bac de rétention étanche en acier galvanisé et caillebotis

Ventilation et filtration

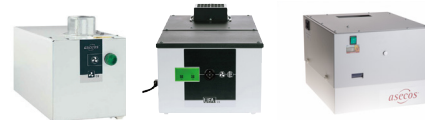

1

2

3

- **EX8436 - ventilation 120 v/h** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du local, gaine d'évacuation long. max. 5 mètres, dim. module 200 x p400 x h200 mm
- **EX8433 1** - **ventilation 120 v/h avec alarme visuelle en cas de dysfonctionnement** : extraction des vapeurs vers l'extérieur du local, gaine d'évacuation longueur max. 5 mètres dim. module 200 x p400 x h200 mm
- **EX8992 2** - **ventilation-filtration anti-explosion (ATEX CE II 3G T4), avec contrôle de l'évacuation d'air et alarme sonore et visuelle**, conforme EN 14470-1 et DIN 12925-1 : boîtier en acier revêtu époxy, silencieux (23 dB), les vapeurs toxiques sont filtrées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques et rejetées dans le local, dim. module : 256 x p555 x h308 mm / 14 kg
- **EX8980, EX8981 3** - **ventilation à recyclage d'air filtré conforme à la norme NFX15211 avec ou sans extraction vers l'extérieur** : les vapeurs toxiques sont recyclées par un filtre au charbon actif pour solvants organiques ou pour vapeurs acides. Un raccord de ventilation DN 75 (Ø 75 mm) permet le rejet des vapeurs à l'extérieur (prévoir 1 gaine d'évacuation) dim. module : 410 x p430 x h300 mm
- **ventilation surpuissante pour plusieurs armoires simultanément** (standard ou ATEX) : sur demande

référence	Prix HT
1 ventilation standard	
EX8436 Ventilation standard, ATEX	
EX8433 Ventilation avec alarme, ATEX	
2 ventilation / filtration ATEX CE II G T4	
EX8992 Ventilation / filtration ATEX avec filtre AS pour solvants organiques	
3 ventilation à recyclage d'air filtré NFX15211	
EX8980 Ventilation / filtration avec filtre AS pour solvants organiques	
EX8981 Ventilation / filtration avec filtre BE pour vapeurs acides	

	armoire larg. 600 mm 3 compartiments	armoire larg. 1100 mm 4 compartiments
dimensions internes (lxpxh)	530 x 480 x h1850 mm	1040 x 480 x h1850 mm
dimensions externes (lxpxh)	545 x 520 x h1950 mm	1055 x 520 x h1950 mm
étagères par compartiment	1 étagère	1 étagère
bac de rétention	1 bac par compartiment	1 bac par compartiment
poids	60 kg	80 kg
Armoires multirisques	ES3030 1	ES3040 2