

Brûleurs électriques

- chauffage uniforme
- base froide au toucher



- l'élément chauffant, de forme conique, dirige la chaleur rayonnante vers le haut, vers un point focal
- chauffage sans contact de tubes à essai, creusets, petits flacons et béchers
- en acier inox, résistent à la corrosion
- le capot supérieur détourne la chaleur de la main
- boîtier ventilé : la circulation d'air maintient la base froide au toucher

1

- modèle avec régulateur : bouton de commande analogique, 2 voyants : "On" et "Bunsen activé", puissance jusqu'à 800 W., fixation pour statif à l'arrière

	brûleurs
température maximum	±800°C
puissance	400 W
alimentation	230 V
dimensions	Ø 120 x h 177 mm / 0,5 kg
Brûleur électrique	TA3010
Brûleur électrique avec régulateur	TA3015 1

Allume gaz piézoélectrique




- longueur 220 mm

référence	Prix HT
BC1675 Allume gaz	

Brûleur électrique avec régulateur intégré

- régulateur intégré de série
- création d'un espace de travail stérile de Ø 60 cm autour du brûleur
- réalisation de râteaux à partir d'un capillaire en 15 secondes
- possibilité de chauffer en toute sécurité en utilisant des récipients tels que tubes à essai, béchers, ballons, etc.
- 2 poignées de manipulation
- excellente stabilité : hauteur 130 mm
- voyant de mise sous tension
- 2 tiges Ø 10 x h350 mm : fixation d'une plate-forme perforée pour verrerie à fond plat (165 x 165 mm)
- structure entièrement métallique
- ne pas utiliser sous hotte
- réglage manuel de la puissance de chauffe par bouton arrière

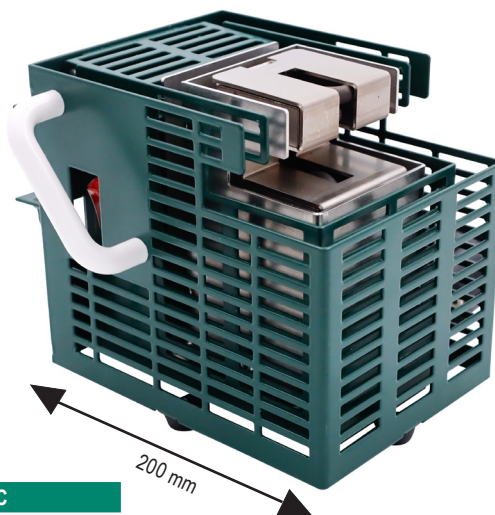

1

température en surface max.	+750°C
température du flux	880°C
puissance	550 W
alimentation	230 V - 50 Hz
dimensions / poids	110 x 145 x h130 mm / 2,3 kg
Brûleur électrique	EU3610 1
accessoires	
Tige de statif	EU6540
plate-forme verrerie avec deux tiges statifs	EU3520 2



3