


Chambres climatiques série KBF-S ECO avec technologie Peltier

0°C à +70°C


10% à 80% HR

I

Climatogramme

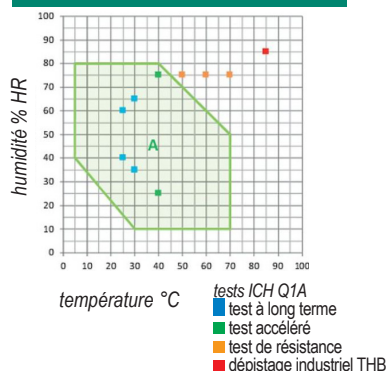

Technologie Peltier éco-responsable :
 Refroidissement thermoélectrique à effet
 Peltier avec technologie de dissipation
 de chaleur brevetée pour une plus faible
 consommation d'énergie

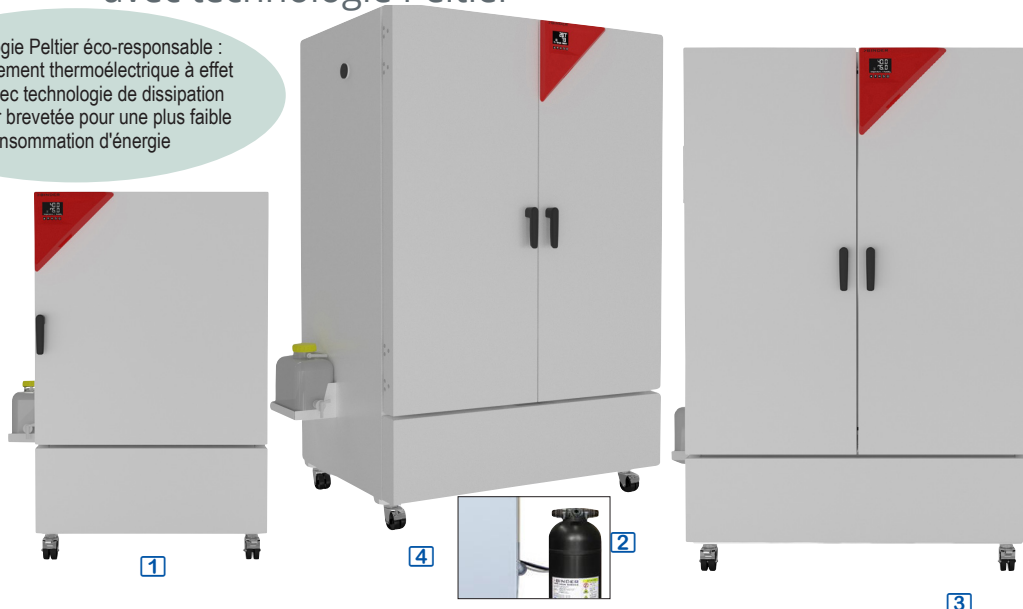

capacité utile	247 litres	400 litres	700 litres	1020 litres
gamme de T°C	sans humidité avec humidité	0 à +70°C +5 à +70°C	0 à +70°C +5 à +70°C	0 à +70°C +5 à +70°C
stabilité de température à 40°C	±0,2°C	±0,5°C	±0,3°C	±0,5°C
homogénéité de température à 40°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
gamme d'humidité	10 à 80% HR	10 à 80% HR	10 à 80% HR	10 à 80% HR
stabilité humidité à 40°C et 75%HR	±0,2% HR	±0,3% HR	±0,3% HR	±0,5% HR
homogén. humidité à 40°C et 75%HR	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C	±0,1°C
recouvr. humidité à 25°C et 60%HR ⁽¹⁾	5 min.	6 min.	7 min.	5 min.
recouvr. humidité à 40°C et 75%HR ⁽¹⁾	11 min.	15 min.	17 min.	15 min.
dim. internes (lpxh)	650 x 485 x h785 mm	570 x 390 x h1200 mm	973 x 576 x h1250 mm	973 x 836 x h1250 mm
nb. plateaux acier inox livrés / max.	2 / 9 plateaux	2 / 15 plateaux	2 / 15 plateaux	2 / 15 plateaux
charge max. par plateau / totale	30 kg / 100 kg	30 kg / 120 kg	45 kg / 150 kg	45 kg / 150 kg
portes	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes
dim. externes (lpxh)	925 x 796(2) x h1461 mm	925 x 796(2) x h1946 mm	1250 x 885(2) x h1925 mm	1250 x 1149(2) x h1925 mm
poids	146 kg	192 kg	267 kg	322 kg
base	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein	4 roulettes avec frein
puissance max. / alimentation	800 W / 230 V	1.100 W / 230 V	1200 W / 230 V	1200 W / 230 V
Incubateurs réfrigérés humidité contrôlée	KBFS240E	KBFS400E	KBFS700E	KBFS1020E
accessoires				
fixations suppl.	KBFS002	KBFS002	KBFS002	KBFS002
plateau inox. supplémentaire	KBFS015	KB400PL	KMF7202	KB1020PL
plateau inox perforé	KB241PIP	KB401PIP	KB700PIP	KB1020PIP
plateau inox renforcé av. fixations	KBFS023	KBFS023	KBFS033	KBFS043
serrure de porte	KBFS003	KBFS003	KBFS004	KBFS004
options pour le traitement de l'eau				
soutp. magn. + connex. bidon alim. eau	KBAP4	KBAP4	KBAP4	KBAP4
kit traitement de l'eau 4	KBAP1	KBAP1	KBAP1	KBAP1
cartouche de rechange	KBAP2	KBAP2	KBAP2	KBAP2

⁽¹⁾ Temps de recouvrement après ouv. porte 30 sec. ⁽²⁾ Ajouter 100 mm pour tenir compte de la poignée et des branchements.

- tests conformes à la directive ICH Q1A même à pleine charge
- sécurité intégrée
- technologie de chambre de préchauffage APT.line™ : incubation homogène même à pleine charge, atmosphère stable, même à des températures jusqu'à 28°C sous la température ambiante
- alimentation indépendante en eau, par bidon
- écran LCD, affichage : température, humidité, alarmes et informations complémentaires
- enregistreur de données interne, lecture possible des valeurs mesurées en format ouvert par USB
- auto test de l'appareil pour une analyse complète de son état
- chambre intérieure en acier inox
- passage de câble Ø 30 mm avec un obturateur en silicone
- livrées avec 2 grilles en acier inox et un support pour bidon

passages de câble	réf.	Prix HT
Ø 30 mm	Haut	KBFS30H
	Droite	KBFS30D
	Gauche	KBFS30G
Ø 50 mm	Haut	KBFS50H
	Droite	KBFS50D
	Gauche	KBFS50G
Ø 100 mm	Haut	KBFS100H
	Droite	KBFS100D
	Gauche	KBFS100G