

Échantillonneurs à usage pharmaceutique
conforme aux normes FDA


- ▶ conforme aux recommandations de la FDA relatives à l'échantillonnage unitaire
- ▶ prélevez plusieurs échantillons individuels en une seule opération

i

normes FDA : grande précision, surfaces lisses, stérilisable, nettoyage simple



- possibilité de sélectionner et de combiner une grande variété de garnitures, pour des volumes d'échantillon de 0 à 2 ml avec le Novartos Multi et jusqu'à 4 ml avec le Novartos Uno
- échantillonnage sans déplacement de la sonde dans le matériau en vrac, ce qui limite les risques d'hétérogénéité des échantillons
- garnitures adaptées, faciles à remplacer
- en acier inox
- Ø 25 mm

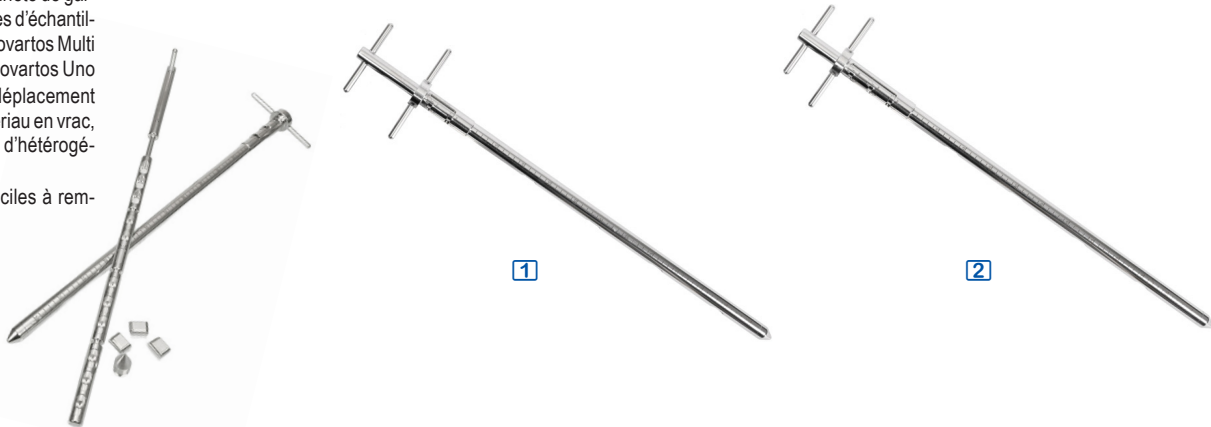

1 Tirage d'échantillon double multiple Novartos Multi

- possibilité de réaliser un double prélèvement multipoint dans plusieurs zones d'échantillonnage prédéfinies
- selon la longueur du dispositif, les 4, 7 ou 9 chambres collectrices sont chacune équipées de deux garnitures d'échantillonnage

2 Tirage d'échantillon triple multiple Novartos Multi

- possibilité de réaliser un triple prélèvement multipoint dans plusieurs zones d'échantillonnage prédéfinies
- selon la longueur du dispositif, les 4, 7 ou 9 chambres collectrices sont chacune équipées de trois garnitures d'échantillonnage

3 Tirage d'échantillon double Novartos Uno

- possibilité de prélever une double quantité dans une zone d'échantillonnage prédéfinie
- pour le double prélèvement, une chambre collectrice est équipée de deux garnitures d'échantillonnage

4 Tirage d'échantillon triple Novartos Uno

- possibilité de prélever une triple quantité dans une zone d'échantillonnage prédéfinie
- pour le triple prélèvement, une chambre collectrice est équipée de trois garnitures d'échantillonnage

accessoires	
Coffre de transport, 123 x 25 x 11 cm	UB0912
Novartos pointe (pas arrondie)	BK8185

	longueur	chambres	garnitures	doublé
tirage d'échantillon double multiple Novartos Multi - modèle sans garniture				
	600 mm	4 chambres	8 garnitures	UB1470
1	1000 mm	7 chambres	14 garnitures	UB1471
	1400 mm	9 chambres	18 garnitures	UB1472
tirage d'échantillon triple multiple Novartos Multi - modèle sans garniture				
	600 mm	4 chambres	12 garnitures	UB1473
2	1000 mm	7 chambres	21 garnitures	UB1474
	1400 mm	9 chambres	27 garnitures	UB1475
garnitures à rajouter pour Novartos Multi				
	Garniture Novartos Multi, 0,0 ml			UB1480
	Garniture Novartos Multi, 0,5 ml			UB1481
	Garniture Novartos Multi, 1 ml			UB1482
	Garniture Novartos Multi, 1,5 ml			UB1483
	Garniture Novartos Multi, 2 ml			UB1484

	longueur	chambres	garnitures	doublé
tirage d'échantillon double Novartos Uno - modèle sans garniture				
	600 mm	1 chambre	2 garnitures	UB1490
3	1000 mm	1 chambre	2 garnitures	UB1491
	1400 mm	1 chambre	2 garnitures	UB1492
tirage d'échantillon triple Novartos Uno - modèle sans garniture				
	600 mm	1 chambre	3 garnitures	BK8180
4	1000 mm	1 chambre	3 garnitures	BK8181
	1400 mm	1 chambre	3 garnitures	BK8182
garnitures à rajouter pour Novartos Uno				
	Garniture Novartos Uno, 0,0 ml			UB1493
	Garniture Novartos Uno, 0,5 ml			UB1494
	Garniture Novartos Uno, 1 ml			UB1495
	Garniture Novartos Uno, 2 ml			UB1496
	Garniture Novartos Uno, 3 ml			UB1497
	Garniture Novartos Uno, 4 ml			UB1498