

# AGITATEURS SECOUEURS


## Mini Rouleur 5 rouleaux vitesse réglable



- mélange homogène du contenu des tubes ou des flacons
- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux
- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- angle de basculement 5°
- charge max.: 5 kg

vitesse	4 à 70 tr/min
rouleaux	long. 200 mm
type rouleau	rouleaux fixes
protection	IP32
dim. / poids	180 x 350 x h110 mm / 3 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleur	ROL140

## Rouleur 5 rouleaux vitesse fixe

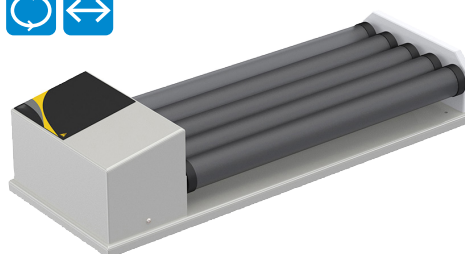

- mélange homogène du contenu des tubes ou des flacons
- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux
- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- charge max.: 5 kg

vitesse	fixe 40 tr/min
rouleaux	long. 334 mm
type rouleau	rouleaux fixes
protection	IP32
dim. / poids	180 x 480 x h113 mm / 3,7 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleur	ROL510

## Rouleaux 5 rouleaux vitesse réglable



► rouleaux amovibles

- mélange homogène du contenu des tubes ou des flacons
- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux
- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- diamètre rouleaux 32 mm
- charge max.: 5 kg

vitesse	4 à 70 tr/min
rouleaux	long. 330 mm
type rouleau	rouleaux amovibles
protection	IP32
dim. / poids	180 x 480 x h110 mm / 3,7 kg
alimentation	24 VDC
Rouleurs	ROL120

## Rouleurs 6 rouleaux vitesse réglable




vitesse	réglable 10 à 70 tr/min
rouleaux	longueur 340 mm
amplitude	24 mm
protection	IP21
dim. / poids	260 x 530 x h120 mm / 5 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleur éco.	ROL610 [1]
Rouleur digital	ROL620 [2]

- mélange parfaitement homogène du contenu de tubes ou flacons
- les tubes ou les flacons sont soumis à un mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient
- capacité maximum : 5 kg
- modèle digital avec minuteur 1 à 1199 minutes et affichage digital LCD vitesse et temps

## Rouleurs 10 rouleaux vitesse réglable



► rouleaux amovibles

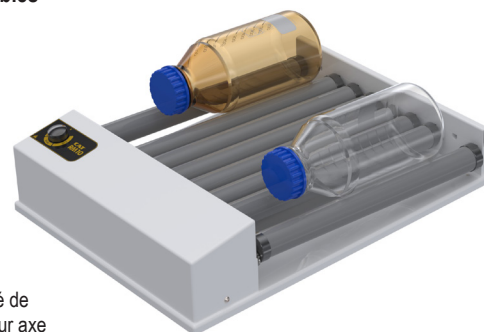

- mouvement combiné de rotation autour de leur axe et de va-et-vient provoqué par un léger excentrage des rouleaux

vitesse	réglable 4 à 70 tr/min
rouleaux	longueur 330 mm
type rouleau	amovibles
protection	IP32
dim. / poids	360 x 480 x h110 mm / 6,5 kg
alimentation	230 V / 50 Hz
Rouleurs	ROL0150

- distance moyenne en les rouleaux : 36 mm
- rouleaux en PVC
- diamètre rouleaux 32 mm
- capacité maximum : 5 kg