

Distributeurs répétitifs seripettor® avec ressort de levage

seripettor®

solutions aqueuses, acides faibles,
milieux de culture agar, solutions
alcalines et solvants polaires

seripettor®pro

liquides agressifs

- aspiration et distribution sans efforts : un ressort de levage assure un remplissage autonome
- réglage du volume par encliquetage d'une barre dentée
- vissage direct sur flacons à filetage GL45, adaptateurs pour flacons GL32, GL38 et S40
- unité de dosage, de distribution et pièces consommables remplaçables
- tuyau de dosage flexible, 800 mm, en option
- pour la distribution de milieux stériles : possibilité de fixer un filtre stérile à l'arrière du bloc de soupapes (filtre non fourni)
- pour la filtration stérile de milieux directement de la bouteille : en option, canule d'éjection avec raccord Luer-Lock pour filtre (filtre non fourni)
- modèle seripettor®pro : matériaux en contact compatibles avec des liquides agressifs
- livrés avec canule de dosage, tube d'aspiration, unité de dosage de recharge et 3 adaptateurs en PP pour flacons GL32, GL38 et S40



capacité	subdivisions	exact.	stabilité	adaptateurs livrés	seripettor®		seripettor®pro	
					référence	prix HT	référence	prix HT
0,2 - 2 ml	0,04 ml	±1,2%	±0,2%	GL32-GL38-S40	BD5702		BD5703	
1 - 10 ml	0,2 ml	±1,2%	±0,2%	GL32-GL38-S40	BD5710		BD5711	
2,5 - 25 ml	0,5 ml	±1,2%	±0,2%	GL32-GL38-S40	BD5725		BD5726	
accessoires de recharge								
unités de distribution non stériles 2 ml, les 3					BD5771		BD5771	
unités de distribution non stériles 10 ml, les 3					BD5772		BD5772	
unités de distribution non stériles 25 ml, les 3					GD5773		GD5773	
unités de distribution stériles 2 ml en emballage individuel, les 7					BD5774		BD5774	
unités de distribution stériles 10 ml en emballage individuel, les 7					BD5775		BD5775	
unités de distribution stériles 25 ml en emballage individuel, les 5					BD5776		BD5776	
tuyau de distribution flexible 2 à 10 ml					BD5777		BD5777	
tuyau de distribution flexible 25 ml					BD5778		BD5778	
canule de distribution avec raccord Luer-Lock pour filtre					-		BD2779	



remplacement
de l'unité de distribution



tuyau de distribution
flexible spiralé, 800 mm

Unités de distribution




- piston en PE et cylindre en PP

Tuyau de distribution flexible spiralé



- en PTFE, 800 mm, avec manette de sécurité
- raccordement au bloc de connexion via un adaptateur

Canule de distribution

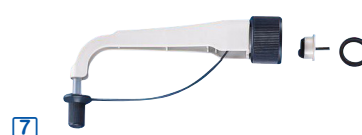

- avec raccord Luer-Lock pour filtre microporeux