


Pipette-distributeur à répétition HandyStep® S

- ▶ jusqu'à 49 opérations de distribution
- ▶ ultra légère : 108 g

- pipette combinée avec une pointe plastique résistant aux produits chimiques
- fonctionnement selon le principe du déplacement positif
- distribution avec grande précision des milieux liquides à haute viscosité, haute densité ou haute pression de vapeur
- insertion facile des pointes verticalement par le bas
- éjection par 1 seule touche, sans contact avec la seringue de distribution
- anse de maintien, répartition équilibrée du poids et des éléments de commande
- affichage du tableau de volumes au dos
- réglage de la course d'une seule main, même gantée, grâce à une molette crantée
- affichage clair de la course
- 10 tailles de seringues, les seringues stériles sont exemptes d'endotoxines, ADN, Rnase et ATP, les seringues 25 et 50 ml nécessitent un adaptateur
- pipette compatible avec des seringues d'autres marques, nous consulter
- livraison avec certificat de qualité, support pour étagère, 3 seringues (0,1 - 1 - 10 ml)

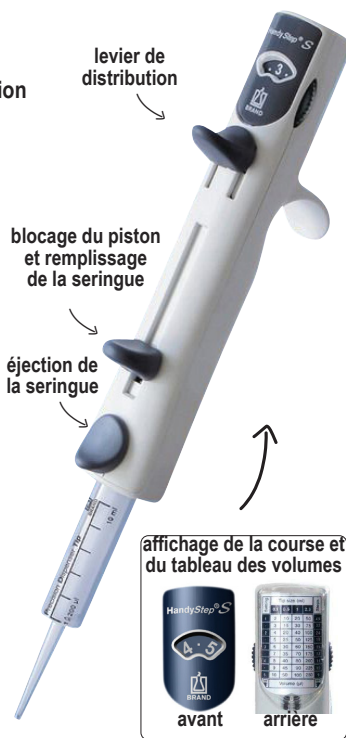

référence	Prix HT
BD1400	Pipette distributeur

Distributeurs à répétition HandyStep® touch

- ▶ volume réglable de 1,0 µl à 50 ml
- 2 versions : modèle standard ou avancé
- commande tactile, affichage couleur des fonctions et paramètres
- éjection automatique des seringues
- reconnaissance automatique de la taille des pointes
- compatible avec les seringues d'autres marques, nous consulter
- surface lisse facile à nettoyer
- alimentation par batterie, charge par induction avec le support en option
- livrés avec bloc secteur, support mural ou pour étagère, échantillons de seringues, certificat de qualité



fonctions communes aux 2 modèles :

- Multi-dosage** : dosage progressif du volume réglé
- Auto-dosage** : dosage automatique par l'appareil
- Pipetage** : pipetage d'un volume défini
- Favoris** : enregistrement des favoris pour un accès rapide

fonctions supplémentaires du modèle avancé :

- Réglages** : adaptation individuelle de l'appareil (luminosité, nom, etc.)
- Dosage séquentiel** : dosage progressif de différents volumes
- Multi-aspiration** : absorption de différents volumes
- titrage** : sortie manuelle ou progressive de liquide pour le titrage

	réf	prix HT
Distributeur HandyStep® touch modèle standard	BD1510	1
Distributeur HandyStep® touch S modèle avancé	BD1520	2
HandyStep® touch S incl. support de chargement modèle avancé	BD1525	
Support de table	BD1501	
Support de chargement	BD1502	
Batterie de recharge	BD1503	

Seringues de distribution

- 10 tailles de pointes, les pointes stériles sont exemptes d'endotoxines, ADN, Rnase et ATP, les pointes 25 et 50 ml nécessitent un adaptateur

volume	pointes standard	pointes stériles
seringues de distribution		
0,1 ml	BD1410 les 100	BD1420 les 100
0,5 ml	BD1411 les 100	BD1421 les 100
1,0 ml	BD1412 les 100	BD1422 les 100
1,25 ml	BD1413 les 100	BD1423 les 100
2,5 ml	BD1414 les 100	BD1424 les 100
5,0 ml	BD1415 les 100	BD1425 les 100
10,0 ml	BD1416 les 100	BD1426 les 100
12,5 ml	BD1417 les 100	BD1427 les 100
25 ml	BD1418 les 50*	BD1428 les 25*
50 ml	BD1419 les 25*	BD1429 les 25*
jeu de 20 seringues de chaque volume : 0,5/1/1,25/2,5/5/10/12,5 ml		
jeu 140 pointes	BD1430	-
adaptateurs pour seringues 25 ml / 50 ml		
adaptateurs	BD1440 les 10	BD1450 les 5

* livrées avec 1 adaptateur



Tableau de volume										
nombre de courses	Pointe utilisée									
	0,1	0,5	1	1,25	2,5	5	10	12,5	25	50
1	2	10	20	25	50	100	200	250	500	1000
1,5	3	15	30	37,5	75	150	300	375	750	1500
2	4	20	40	50	100	200	400	500	1000	2000
2,5	5	25	50	62,5	125	250	500	625	1250	2500
3	6	30	60	75	150	300	600	750	1500	3000
3,5	7	35	70	87,5	175	350	700	875	1750	3500
4	8	40	80	100	200	400	800	1000	2000	4000
4,5	9	45	90	112,5	225	450	900	1125	2250	4500
5	10	50	100	125	250	500	1000	1250	2500	5000