


Coffret lave-œil mixte pour risques chimique

Référence :
SC2001

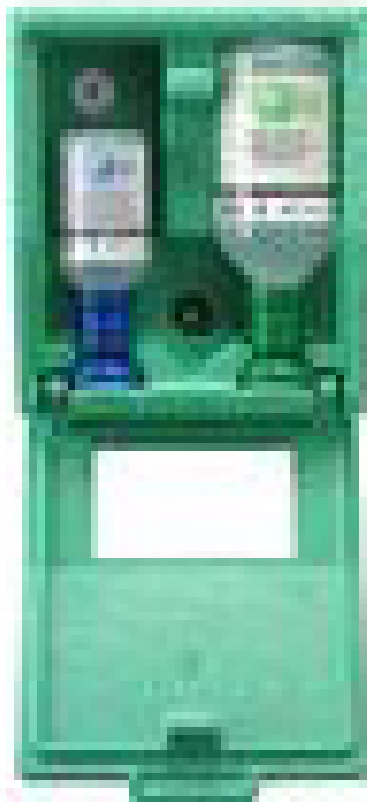

- station de lavage oculaire murale destinée aux postes exposés aux projections de produits chimiques, acides ou bases
- le coffret comprend deux solutions complémentaires et un miroir permettant une intervention rapide en cas d'accident
- composition :
 - 1 flacon de 200 ml de solution pH Neutre, destiné à neutraliser rapidement les projections acides ou alcalines
 - 1 flacon de 500 ml de solution ophtalmique stérile à 0,9 % de NaCl, destiné au lavage de surface et à la réhydratation de l'œil
- 1 coffret mural avec miroir et instructions d'utilisation
- dim.: 270 x 225 x 110 mm
- poids : 620 g
- température de conservation : +5 à +25°C
- solutions prêtes à l'emploi
- capuchons ergonomiques permettant le rinçage direct
- la solution pH Neutre permet de ramener rapidement le pH de l'œil vers une valeur neutre après projection chimique; la solution saline est utilisée ensuite pour poursuivre le rinçage ou seule pour éliminer poussières et corps étrangers
- conditionnement : l'unité